

REITEL

*Amg*  
**CAO**  
Digitale Laborgeräte



# ANYCAD SYSTEM | CAD/CAM



## ANYSCAN MINI

AnySCAN Scanner, Set

Best.-Nr.: 58411000

- vollautomatischer 3D-Dentalscanner mit moderner Optik und platzsparenden Maßen
- produziert schnell, einfach und preisgünstig
- inkl. monochromem Textur-Scan zum Digitalisieren von kleinen Markierungen an den Modellen
- leicht verständliche Benutzeroberfläche der Software dental Scan
- dental Scan und exocad® DentalCAD voll kompatibel
- auch andere Gegenstände in der Größe des Messfelds scanbar dank Universal-Modus
- 3D-Modelle problemlose Weiterverarbeitung von 3D-Modellen in diversen CAD-Anwendungen
- ohne Lizenzgebühren dauerhaft nutzbar
- im Set mit exocad® und Workstation

## ANYSCAN Vinyl HR

AnySCAN Scanner, Set

Best.-Nr.: 58430000

- maximale Produktivität im Laboralltag
- scant mit geöffneter oder geschlossener Klappe, 180-Grad-Öffnung bietet viel Platz zum Arbeiten
- Zeitersparnis durch vollautomatische Z-Achse
- fährt das zu scannende Objekt selbständig ins Messfeld – kein Aufschauben von Distanzplatten mehr
- einfache Bedienung durch Touch Display direkt am Scanner
- verbesserte Motorsteuerung gewährleistet ruhige und schnelle Motorfahrten
- große Systemplatte ermöglicht direkte Aufnahme aller namhaften Artikulatoren
- stabiler Stand durch rutschfeste Gummimatte auf der Systemplatte
- im Set mit exocad® und Workstation

## ANYSCAN Vinyl UXD

AnySCAN Scanner, Set

Best.-Nr.: 58440000

- Modernste 3D-Sensoreinheit
- UX-Modul, bestehend aus zwei weiteren Kameras und einem Projektor
- Vergrößerte Artikulator-Systemplatte
- Stümpfe, die bei secondDie und singleDie freigestellt werden sollen, beleuchtet der Projektor auf dem Modell im Innenraum
- Rasante Motorsteuerung
- Gehäuse aus hochwertigen Materialien
- Möglichkeit, zwischen vier Modi zu wählen, so kann die Anzahl der Kameras sowie deren Auflösung bestimmt werden
- Mithilfe des Innenraummonitorings werden im Vinyl UXD die Objekte durch eine KI-gesteuerte Z-Achsenpositionierung in der Höhe automatisch ausgerichtet
- im Set mit exocad® und Workstation

TECHNISCHE DATEN	ANYSCAN MINI	Vinyl HR	Vinyl UXD
Netzanschluss	24 V DC	230 V / 50 – 60 Hz	230 V / 50 – 60 Hz
Aufnahmeleistung	60 W	60 W	60 W
Anschlüsse	1x USB, 1x Kaltgerätestecker	1x USB, 1x Kaltgerätestecker	1x USB, 1x Kaltgerätestecker
Maße (B x H x T)	36 x 31 x 39 cm	45,5 x 43 x 42 cm	45,5 x 43 x 42 cm
Gewicht	9,5 kg	23 kg	25 kg
Messgeschwindigkeit Komplettkiefer	Total: 29 Sek.	Total: 35 Sek.	Total: 22 Sek. und 24 Sek.
Messgeschwindigkeit Einzelstumpf	Total: 42 Sek.	Total: 49 Sek.	Total: 31 Sek. und 40 Sek.
Messgeschwindigkeit 3-gliedrige Brücke	Total: 56 Sek.	Total: 75 Sek.	Total: 55 Sek. und 70 Sek.
Auflösung	1,6 MP	3,2 MP	2x 3,2 MP und 2x 1 MP (4 Kameras)
Messfeld (X/Y/Z)	80 x 60 x 85 mm	80 x 60 x 85 mm	80 x 60 x 82 mm und 88 x 63 x 82 mm
Messgenauigkeit (nach ISO 12836)	6 µm	4 µm	4 µm
Virtueller Artikulator	nein	ja	ja
Triple Tray®-Abdruckscan	nein	ja	ja
secondDie	ja	ja	ja
multiDie	nein	ja	ja
multiCase	nein	ja	ja
Textur-Scan (monochrom)	ja	ja	ja
Textur-Scan (farbig)	nein	ja	ja
Universal-Modus	ja	ja	ja
exocad®-kompatibel	ja	ja	ja
Bestell-Nummer	43411000 (im Set mit exocad®)	43430000 (im Set mit exocad®)	43440000 (im Set mit exocad®)

# ANYCAD SYSTEM | CAD/CAM



**exocad®**  
AnyCAD Designsoftware  
**Best.-Nr.: 58401000**

- intuitiver zahntechnischer Workflow
- orientiert sich exakt am technischem Ablauf des Dentallabors
- überzeugt durch Schnelligkeit und intuitive Bedienung – auch bei komplexen Fällen
- unabhängig, innovativ und zukunftssicher
- ideale Ergänzung zu unseren Dentalscannern
- führende dentale CAD-Software (OEM) – hohe Akzeptanz sowohl bei Einsteigern als auch bei digitalen Experten
- keine jährlichen Lizenzgebühren
- minimiert Schulungskosten, maximiert Produktivität
- Standardversion von exocad DentalCAD deckt bereits eine Vielzahl von Indikationen ab, z. B. Kronen, Kappchen oder Geschiebe

#### exocad® – empfohlene Rechner-Leistung

Betriebssystem	Windows 10®, 64 bit
Prozessor	Quad-Core (mind.)
Arbeitsspeicher	16 GB
Hard Drive	ca. 500 GB

#### exocad® – Module

provisorische Kronen und Brücken
Abutment
Stege
DICOM-Viewer
virtueller Artikulator
Aufbiss-Schiene
TruSmile
ModelCreator

#### – Bestell-Nummer

(AnyCAD Computer, vorkonfiguriert)

Workstation, vorkonfiguriert

#### AnyCAM Zubehör für Fräs-Einheiten

Die anwenderfreundlichen AnyCAM Fräsmaschinen unterstützen eine breite Palette von Werkzeugen und ermöglichen damit eine einfache Integration in den Arbeitsalltag.

Unterschiedliche Materialien wie Wachs, Zirkoniumdioxid, Hybrid Komposite, PMMA und Peek in unterschiedlichen Rohlingsmaßen können schnell und präzise bearbeitet werden.

Für Fragen zu Werkzeugen, Werkstoffen und Materialien stehen unsere CAD / CAM Produktspezialisten und Zahntechniker zur Verfügung.

**Zubehör: Fräsadapter 20er / 40er / 80er für Stiftblanks, Bestell-Nummer: 58505000**

weiteres Zubehör ist auf Anfrage erhältlich

#### Dusty Zirkon Feinstaubsauger

- ideal zum Absaugen von Zirkondioxidstaub (CAD/CAM) und anderen Feinstäuben
- extrem geringe Geräusentwicklung
- absolut flexibel im Anschluss externer Geräte durch speziellen Adapter
- automatisch zuschaltbare Gerätesteckdose
- inkl. Filterreinigungsfunktion

TECHNISCHE DATEN	DUSTY ZIRKON
Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz
Aufnahmeleistung	1.200 W
Steckdose	2.400 W
Maße (B x H x T)	39 x 61 x 57 cm
Gewicht	16 kg
Entstaubung	99,9% (Klasse H)
Arbeitsgeräusche	60 dB(A)
Behältervolumen	42l
Bestell-Nummer	24500000

#### ERGORET CLASSIC Arbeitsplätze

**Best.-Nr. CLASSIC: 16901001**

Der ERGORET CLASSIC ist ein Arbeitsplatz zum Schleifen und Bearbeiten von Modellen, Gerüsten, kieferorthopädischen Apparaten oder staubenden Werkstücken. Außerdem ist er perfekt für die Bearbeitung von Zirkon mit einer Wasserturbine geeignet.



#### ERGORET COMFORT Arbeitsplätze

**Best.-Nr. CLASSIC: 16801000**

Bei dem ERGORET COMFORT von REITEL handelt es sich um eine Art Schutzhaube für alle zahntechnischen Arbeiten, bei denen Schmutz, Staub und Dampf entsteht. Die abnehmbare Haube aus Sicherheitsglas schützt Sie dabei vor dem Einatmen solcher Stoffe und trägt so wesentlich zu Ihrer Gesundheit im Zahnlabor bei.




**Dusty Zirkon**  
Feinstaubsauger

# ANYCAD SYSTEM | CAD/CAM



**ANYCAM 52**  
Trocken-Fräseinheit  
Best.-Nr.: 58501400

- Zirkonoxid, Wachs, PMMA, Komposit, PEEK, Gips, faserverstärktes Harz, CoCR-Sintermetall
- Snap-In Haltersystem mit sechs Steckplätzen für 98,5 mm Rohlinge
- ununterbrochenes, unbeaufsichtigtes Fräsen durch den automatischen 15-fach Werkzeugwechsler (ATC)
- bedienerfreundliches VPanel sorgt für komfortable Produktions- und Gerätekontrolle vom Computer aus
- 5-Achs-Präzisionsfräsen bewältigen tiefe Unterschnitte, Fräsen von großspannigen Brücken und Totalprothesen

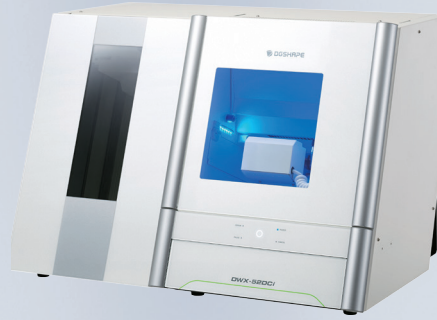

**ANYCAM 52 DCI**  
Trocken-Fräseinheit  
Best.-Nr.: 58501300

- Zirkonoxid, Wachs, PMMA, Komposit, PEEK, Gips, faserverstärktes Harz, CoCR-Sintermetall
- Snap-In Haltersystem des automatischen Rohlingswechslers ermöglicht Laden von bis zu 6 Rohlingen von 98,5 mm
- DWINDEX-Software zur Protokollierung der Fräsvorgänge und zur Ermittlung des ROI: bessere Planung, Analyse und Verwaltung
- Zuverlässiges, unbeaufsichtigtes Fräsen durch automatischen 15-fach Werkzeugwechsler (ATC) mit beschichteten und unbeschichteten Fräsern



**ANYCAM 42 W**  
Nass-Fräseinheit  
Best.-Nr.: 58503000

- Glaskeramik, Komposit
- Hochgeschwindigkeits-Produktion mit der einzigartigen DGSHAPE-Spindel
- automatische Sechsfach-Werkzeugwechsler ermöglicht unterbrechungsfreies Schleifen
- ermöglicht Einbindung in Netzwerke und Kommunikation mit anderer Hardware
- VPanel erlaubt einfache Überwachung der Schleifaufgaben und der Werkzeuge
- hochwertige Düsen und ein erweiterter Kühlmitteltank für größeren Volumenstrom und mehr Kapazität

# POST-PROCESSING IM 3D-DRUCK



**SONIRET RP COOL I HEAT**  
Ultraschallgerät  
Best.-Nr. COOL: 10200005  
Best.-Nr. HEAT: 10200006

- effektive Reinigung von Werkzeug und Instrumenten
- besonders gut geeignet für schwer zugängliche Stellen
- individuelle Einstellung von Temperatur (HEAT- Variante) und Ultraschalldauer
- umfangreiches Zubehör
- hygienisch durch Edelstahloberfläche
- Zwei Reinigungstanks mit je einem Auslassventil



**POLYURE**  
Lichthärtegerät  
Best.-Nr.: 18310000

- drei Lichtfrequenzen für verschiedenste Materialien
- langlebige Hochleistungs-LED's
- große Zugriffsfläche und Bewegungsfreiheit über Klappdeckel
- großzügiger Drehteller
- Zeit individuell über digitalen Timer einstellbar
- integrierte Lüftung des Innenraums vermeidet Überhitzung Ihrer Werkstücke