


The logo for REITEL, featuring the word "REITEL" in a dark blue, sans-serif font. To the right of the text is a stylized red graphic element consisting of two curved lines that suggest a network or a signal.

REITEL

CONNECTING DIGITAL WORKSTEPS

Ihr Leitfaden für moderne Technik.

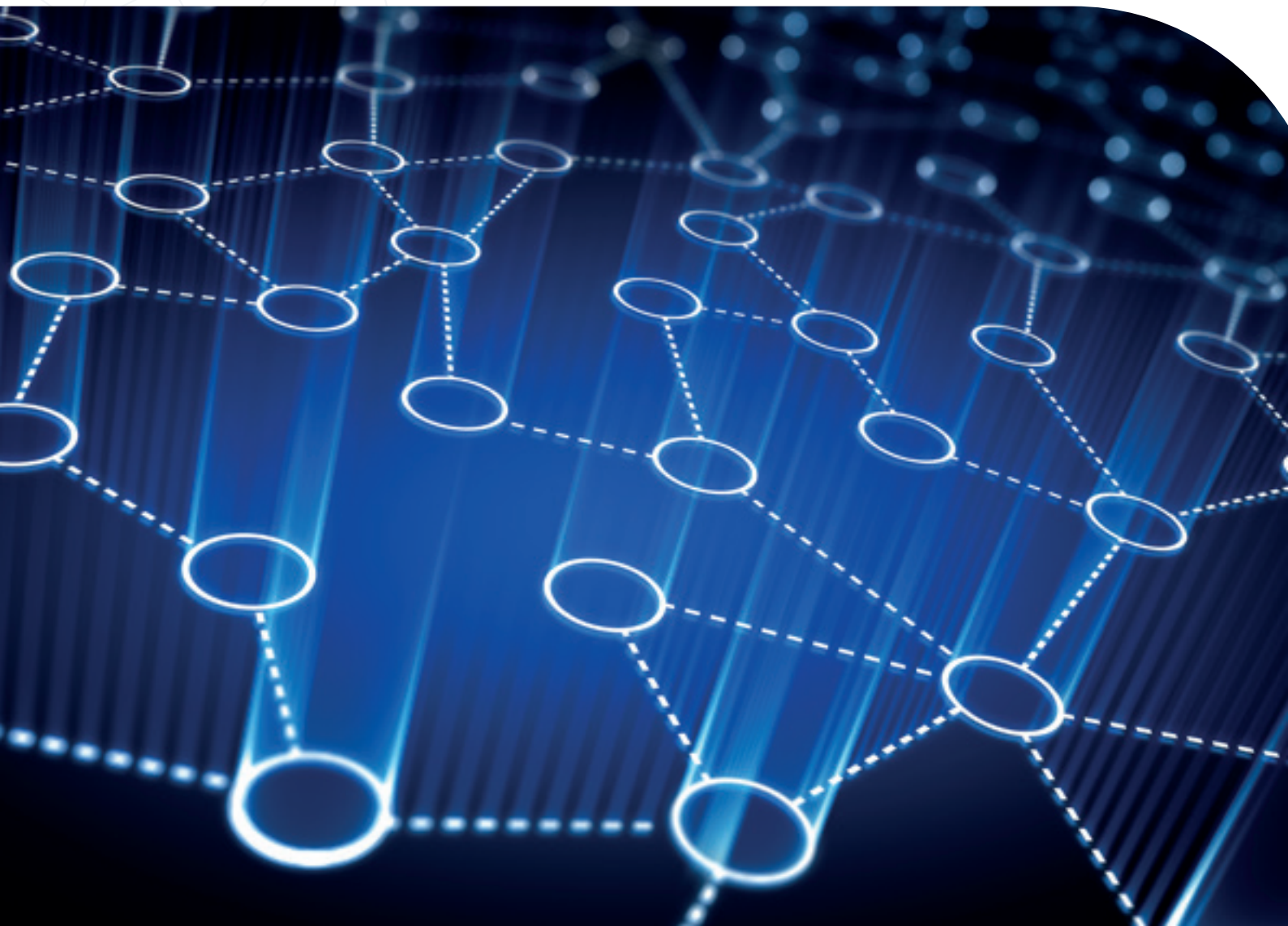

ÜBERSICHT

Produkte und Zubehör.



CAD/CAM s.6

DIGITAL WORKFLOW
FRÄSEN
SCANNER

Reinigen s.10

STEAMY MINI
SUPERSTEAM
TRONADA
DELIMER COMFORT
ENTKALKERKARTUSCHE
BIOSTEAM CENTER
ABDAMPFSCHALE
SONIRET SWEEP
SONIRET RP
PROTOFRESH

Temperieren s. 13

THERMORET

Rühren & Rütteln s. 14

VACURET EASY
VACURET CLASSIC
VACURET DIGIT
VIBROMAT

Trimmen s. 16

ROTOGRIND CLASSIC
ROTOGRIND NT
ROTOGRIND NT KFO
SCHLEIFSCHEIBEN

Arbeitsplatzleuchten s. 18

LED-LEUCHTE TABLE COMFORT
LED-LEUCHTE TABLE MINI

Polymerisieren / Lichthärten s. 19

POLYCURE
POLYMAT

Vorwärmen s. 20

RETOMAT MINI

Giessen s. 21

INDURET MINI
RETOCAST I
RETOCAST T
UMLAUFKÜHLUNG

Sandstrahlen s. 22

SANDURET
SANDUBLAST
REITEL GLANZ
REITEL KORUND

Arbeitsplätze s. 24

ERGORET COMFORT
ERGORET CLASSIC
ERGORET CC
ERGORET CC KFO
VARIO-HUBTISCH
VARIO-HUBTISCH mit
BUCHENHOLZPLATTE

Absaugen s. 26

DUSTY MINI HEPA
DUSTY COMFORT
DUSTY ZIRKON

Polieren s. 27

POLIRET MINI
POLIRET CLASSIC
POLIRET COMFORT
POLIRET TWIN
REITEL STONE

WIR SIND EDELSTAHL!

Seit vier Jahrzehnten sind wir innovativ führend in der Laborgerätechnik und haben uns als Hersteller von Medizinprodukten in Edelstahl etabliert. Unser Erfolg beruht auf einem hochqualifizierten Team und der konsequenten Fokussierung auf Kundennutzen. Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für eine Vielzahl von Branchen, darunter Dentallabore, Praxen, Industrieunternehmen, Restauratoren und Schmuckhersteller, und stellen dabei stets unsere Kunden in den Mittelpunkt.

Der digitale Workflow bietet viele Vorteile, jedoch bleibt die manuelle Endbearbeitung und die individuelle Leistung entscheidend für höchste Qualität. Hier kommen unsere bewährten Edelstahlgeräte wie Dampfstrahler, Sandstrahler, Ultraschallreiniger und Poliermaschinen ins Spiel. Diese sind unerlässlich, um Zahnersatz gründlich zu reinigen, zu polieren und zu veredeln, bevor er beim Patienten eingesetzt wird. Unsere Dampfstrahler entfernen zuverlässig Rückstände und Keime, Sandstrahler sorgen für eine perfekte Oberflächenstruktur, und Ultraschallreiniger garantieren eine gründliche Reinigung schwer zugänglicher Bereiche, was die Hygiene und Qualität des Endprodukts erhöht.

Die Kombination aus zahntechnischem Workflow und unseren konventionellen Geräten bietet unschlagbare Vorteile. Der digitale Workflow minimiert Fehler und beschleunigt die Produktion, während REITEL Geräte die notwendige Endbearbeitung und herausragende Qualität sicherstellen. Durch die Integration digitaler und konventioneller Technologien ermöglichen wir Zahnärzten und Zahntechnikern, Behandlungs- und Herstellungszeiten zu verkürzen – ein Vorteil für Patienten, Praxen und Labore.

Für den Erfolg unserer Kunden!

Daniel Reitel

Daniel Reitel
Geschäftsführender Gesellschafter



Daniel Reitel
Geschäftsführender Gesellschafter

Der STEAMY MINI –
Das Original aus Edelstahl



UNSERE LEISTUNGEN FÜR HANDEL UND ANWENDER



1. PERSÖNLICHER KONTAKT

Bei REITEL steht der direkte Austausch mit unseren Kunden im Mittelpunkt. Unsere Experten sind nicht nur online, sondern auch persönlich für Sie da – sei es vor Ort oder im digitalen Workflow. Wir besuchen Sie gerne, um Ihre individuellen Anforderungen kennenzulernen und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.

Mit unserem REITEL-Portal erleben Sie Kommunikation auf einem neuen Level. Hier können Sie schnell und unkompliziert mit uns in Kontakt treten, wichtige Informationen abrufen oder Ihr Anliegen direkt platzieren. Zudem bieten wir Ihnen die Möglichkeit, per Live-Chat oder Zoom-Call mit unseren Spezialisten zu sprechen.

Bleiben Sie über unsere Social-Media-Kanäle auf LinkedIn, Instagram, Facebook und YouTube stets auf dem Laufenden. Egal ob digital oder persönlich – bei REITEL sind wir immer für Sie da.



2. SERVICE-ORIENTIERUNG

Bei REITEL steht exzellenter Service an erster Stelle. Mit jedem registrierten Gerät sichern Sie sich eine höhere Servicepriorität – ein weiterer Grund, auf die bewährte Qualität und den erstklassigen Support von REITEL zu setzen. Unser Ziel ist es, Ihre Arbeitsabläufe so effizient wie möglich zu gestalten und unnötige Ausfallzeiten zu vermeiden.



3. EINSATZGARANTIE

Wir bei REITEL möchten sicherstellen, dass Sie jederzeit einsatzbereit bleiben. Ist ein benötigtes Gerät weder im Handel noch bei uns verfügbar, stellen wir in Absprache mit einem Fachhändler kostenfrei ein Mietgerät bereit.

Sollte die Lieferzeit eines bestellten Geräts mehr als zehn Arbeitstage betragen, bieten wir ebenfalls eine kostenfreie Mietlösung an, um Engpässe zu überbrücken. Auch im Garantiefall erhalten Sie kostenlos ein Mietgerät bei Verfügbarkeit. Diese Geräte können sich technisch vom Original unterscheiden, sind jedoch für den gleichen Einsatzzweck geeignet.



4. REITEL CARE SERVICEERWEITERUNG

Mit der REITEL CARE Serviceerweiterung erhalten Sie eine umfassende Unterstützung bei Ausfällen Ihrer Geräte. Wir übernehmen die Abholung und Rücksendung des betroffenen Geräts und stellen Ihnen, je nach Verfügbarkeit, kostenfrei ein Ersatzgerät zur Verfügung.


Sollte die Garantiezeit abgelaufen sein, erhalten Sie einen Kostenvoranschlag unabhängig von REITEL CARE. Besonders vorteilhaft: Die REITEL CARE Erweiterung kann auch nach dem Kauf erworben werden und bietet Ihnen für 12 Monate zusätzliche Unterstützung innerhalb Deutschlands und Österreichs. Bitte beachten Sie, dass REITEL CARE derzeit ausschließlich für Kleingeräte verfügbar ist.



REITEL GOES GREEN

Bei REITEL stehen Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt unserer Produktphilosophie. Edelstahl ist in der Zahntechnik und im medizinischen Bereich nicht nur wegen seiner hygienischen Eigenschaften unverzichtbar, sondern auch aufgrund seiner außergewöhnlichen Langlebigkeit. Unsere Geräte, ob neu oder gebraucht, überzeugen durch ihre Robustheit und Zuverlässigkeit. Dies schont nicht nur Ihre Finanzen, sondern trägt auch aktiv zum Umweltschutz bei, indem die Lebensdauer der Geräte maximiert wird und weniger Abfall entsteht.

Unsere Dampfstrahlgeräte setzen neue Maßstäbe in Sachen Energieeffizienz: Durch die direkte Heizung wird im Vergleich zu herkömmlichen, indirekten Heizungen im Kesselboden fast die Hälfte des Stromverbrauchs eingespart. Diese innovative Technologie ermöglicht nicht nur eine erhebliche Reduktion des Energieverbrauchs, sondern auch eine schnelle und kostengünstige Wartung durch den einfachen Austausch der Heizung.

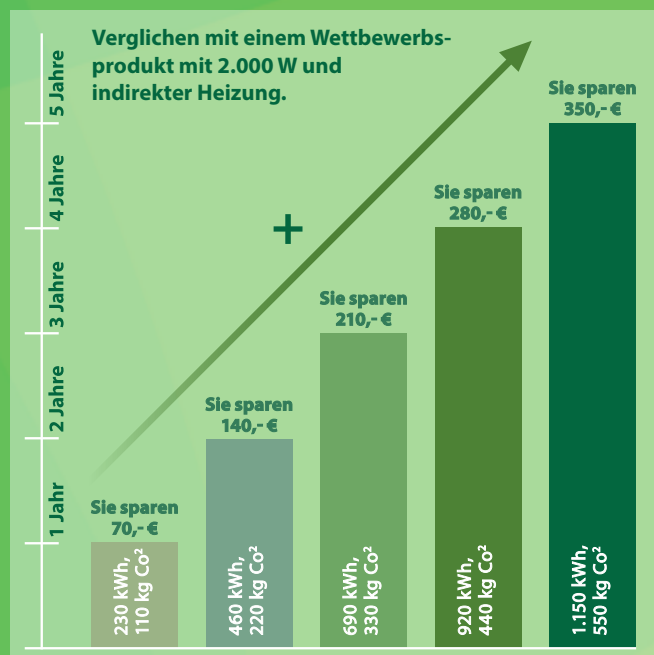

MOTOREN

Unsere Motoren sind auf geringen Verbrauch optimiert.

Nicht nur die Drehzahl, auch die benötigte Leistung wird der Anforderung angepasst.

Volle Leistung nur wenn benötigt, ist nachhaltig!

HEIZUNGEN

Die Heizungen in unseren Dampfstrahlern liegen direkt im Tank.

Das spart Energie. Es lassen sich im Jahr 100 Kwh bzw. 126kg CO₂ Braunkohlestrom einsparen.

Weniger Strom ist nachhaltig!

EDELSTAHL

Edelstahl lässt sich einfach reinigen und desinfizieren und sieht auch nach vielen Jahren noch gut aus.

Es verzeigt Schläge und Stöße, ohne zu zerbrechen.

Saubere & robuste Technik ist nachhaltig!

TANKS

Die durchschnittliche Lebensdauer eines STEAMY MINI Tanks beträgt 15 Jahre.

Alle Teile für den STEAMY MINI, die in dieser Zeit hergestellt wurden, sind verfügbar.

Lange Lebensdauer ist nachhaltig!

CONNECTING DIGITAL WORKSTEPS

Um die Brücke zwischen klassischer Handwerkskunst und modernsten CAD/CAM-Technologien perfekt zu schlagen, bietet REITEL mit CONNECTING DIGITAL WORKSTEPS die ideale Systemlösung für Ihr Labor!

Das durchdachte Konzept verbindet bewährte analoge Bearbeitungsschritte nahtlos mit digitalen Fertigungsprozessen. Von der sorgfältigen Vorbereitung und Ausbettung über das präzise Reinigen 3D-gedruckter Objekte bis hin zum perfekten Oberflächenfinish sorgen die robusten REITEL-Geräte

für maximale Prozesssicherheit an jeder Schnittstelle. Durch die optimale Abstimmung der einzelnen Workflow-Schritte minimieren Sie Fehlerquellen, sparen wertvolle Arbeitszeit und steigern die Wirtschaftlichkeit Ihres Labors spürbar. Verlassen Sie sich auf langlebige Edelstahlqualität, intuitive Bedienung und konstant reproduzierbare Spitzenergebnisse – für eine zukunftssichere Verbindung von Tradition und High-Tech im Laboralltag!



ANYCAD SYSTEME | FRÄSEN



ANYCAM 53 D

Trocken-Fräseinheit

Best.-Nr.: 58501410

- » Fräst Zirkonoxid, Wachs, PMMA, Komposit, PEEK, Gips, glasfaserverstärktes Harz und CoCr-Sintermetall
- » Kompaktes Materialaufnahmesystem für einzelne Adapter, optimiert für Effizienz und Flexibilität
- » Ununterbrochenes, unbeaufsichtigtes Fräsen durch den automatischen 15-fach Werkzeugwechsler (ATC)
- » Benutzerfreundliches VPanel sorgt für komfortable Produktions- und Gerätekontrolle vom Computer aus
- » 5-Achs-Präzisionsfräsen ermöglicht tiefe Unterschnitte, Fräsen von großspannigen Brücken und Totalprothesen



ANYCAM 53 DC

Trocken-Fräseinheit

Best.-Nr.: 58501500

- » Fräst Zirkonoxid, Wachs, PMMA, Komposit, PEEK, Gips, glasfaserverstärktes Harz und CoCr-Sintermetall
- » Automatischer 6-fach Rohlingswechsler ermöglicht das Laden von bis zu 6 Rohlingen mit einem Durchmesser von 98,5 mm für effiziente Serienproduktion
- » DWINDEX-Software zur Protokollierung der Fräsvorgänge und zur Analyse des ROI für verbesserte Planung, Verwaltung und Entscheidungsfindung
- » Unbeaufsichtigtes, zuverlässiges Fräsen durch den automatischen 15-fach Werkzeugwechsler (ATC), kompatibel mit beschichteten und unbeschichteten Fräsern



ANYCAM 43 W

Nass-Fräseinheit

Best.-Nr.: 58504000

- » geeignet für Glaskeramik, Hybridkeramik und Kompositmaterialien
- » Hochgeschwindigkeits-Schleifen mit bis zu 60.000 U/min dank leistungsstarker DGSHAPE-Spindel
- » automatischer Sechsfach-Werkzeugwechsler für unterbrechungsfreien Betrieb
- » einfache Überwachung und Steuerung über VPanel-Software
- » erweiterter Kühlmittelkessel und hochwertige Düsen für mehr Volumenstrom und weniger Wartung



ANYCAD SYSTEME | SCANNER



ANYSCAN MINI

AnySCAN Scanner, Set
Best.-Nr.: 58411000

- » vollautomatischer 3D-Dentalscanner mit moderner Optik und platzsparenden Maßen
- » produziert schnell, einfach und preisgünstig
- » inkl. monochromem Textur-Scan zum Digitalisieren von kleinen Markierungen an den Modellen
- » leicht verständliche Benutzeroberfläche der Software dental Scan
- » dental Scan und exocad® DentalCAD voll kompatibel
- » auch andere Gegenstände in der Größe des Messfelds scanbar dank Universal-Modus
- » 3D-Modelle problemlose Weiterverarbeitung von 3D-Modellen in diversen CAD-Anwendungen
- » ohne Lizenzgebühren dauerhaft nutzbar
- » optional im Set mit exocad® und Workstation



ANYSCAN VINYL HR

AnySCAN Scanner, Set
Best.-Nr.: 58430000

- » maximale Produktivität im Laboralltag
- » scant mit geöffneter oder geschlossener Klappe, 180-Grad-Öffnung bietet viel Platz zum Arbeiten
- » Zeitersparnis durch vollautomatische Z-Achse
- » fährt das zu scannende Objekt selbstständig ins Messfeld – kein Aufschauben von Distanzplatten mehr
- » einfache Bedienung durch Touch Display direkt am Scanner
- » verbesserte Motorsteuerung gewährleistet ruhige und schnelle Motorfahrten
- » große Systemplatte ermöglicht direkte Aufnahme aller namhaften Artikulatoren
- » stabiler Stand durch rutschfeste Gummimatte auf der Systemplatte
- » optional im Set mit exocad® und Workstation



ANYSCAN VINYL UXD

AnySCAN Scanner, Set
Best.-Nr.: 58440000

- » Modernste 3D-Sensoreinheit
- » UX-Modul, bestehend aus zwei weiteren Kameras und einem Projektor
- » Vergrößerte Artikulator-Systemplatte
- » Stümpfe, die bei secondDie und singleDie freigestellt werden sollen, beleuchtet der Projektor auf dem Modell im Innenraum
- » Rasante Motorsteuerung
- » Gehäuse aus hochwertigen Materialien
- » Möglichkeit, zwischen vier Modi zu wählen, so kann die Anzahl der Kameras sowie deren Auflösung bestimmt werden
- » Mithilfe des Innenraummonitorings werden im Vinyl UXD die Objekte durch eine KI-gesteuerte Z-Achsenpositionierung in der Höhe automatisch ausgerichtet
- » optional im Set mit exocad® und Workstation

TECHNISCHE DATEN	ANYSCAN MINI	Vinyl HR	Vinyl UXD
Netzanschluss	24 V DC	230 V / 50 – 60 Hz	230 V / 50 – 60 Hz
Aufnahmeleistung	60 W	60 W	60 W
Anschlüsse	1x USB, 1x Kaltgerätestecker	1x USB, 1x Kaltgerätestecker	1x USB, 1x Kaltgerätestecker
Maße (B x H x T)	36 x 31 x 39 cm	45,5 x 43 x 42 cm	45,5 x 43 x 42 cm
Gewicht	9,5 kg	23 kg	25 kg
Messgeschwindigkeit Komplettkiefer	Total: 29 Sek.	Total: 35 Sek.	Total: 22 Sek. und 24 Sek.
Messgeschwindigkeit Einzelstumpf	Total: 42 Sek.	Total: 49 Sek.	Total: 31 Sek. und 40 Sek.
Messgeschwindigkeit 3-gliedrige Brücke	Total: 56 Sek.	Total: 75 Sek.	Total: 55 Sek. und 70 Sek.
Auflösung	1,6 MP	3,2 MP	2x 3,2 MP und 2x 1 MP (4 Kameras)
Messfeld (X / Y / Z)	80 x 60 x 85 mm	80 x 60 x 85 mm	80 x 60 x 82 mm und 88 x 63 x 82 mm
Messgenauigkeit (nach ISO 12836)	6 µm	4 µm	4 µm
Virtueller Artikulator	nein	ja	ja
Triple Tray®-Abdruckscan	nein	ja	ja
secondDie	ja	ja	ja
multiDie	nein	ja	ja
multiCase	nein	ja	ja
Textur-Scan (monochrom)	ja	ja	ja
Textur-Scan (farbig)	nein	ja	ja
Universal-Modus	ja	ja	ja
exocad®-kompatibel	ja	ja	ja
Bestell-Nummer	43411000 (im Set mit exocad®)	43430000 (im Set mit exocad®)	43440000 (im Set mit exocad®)

REINIGEN

Die REITEL Dampfstrahlergeräte eignen sich hervorragend zum Reinigen sämtlicher zahntechnischer Arbeiten und anderer Werkstücke. Verschmutzungen, die im Laboralltag anfallen, wie z.B. Fette, Wachse oder auch hartnäckige Verklebungen, lassen sich ohne Zusatz von chemischen Stoffen mühelos entfernen. Eine innerhalb des Tanks verbaute Heizung erreicht innerhalb kürzester Zeit das passende Temperatur- und Drucklevel, so dass Sie schnell und effektiv abdampfen können. Das Gerät benötigt

weniger Energie als eine indirekte Heizung und spart somit über 100 kg CO₂ pro Jahr ein! Die robusten Geräte sind mit verschiedenen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, so dass Sie lange Freude an einem zuverlässigen Gerät haben werden. Für dauerhaft angenehmes Arbeiten sorgt die ergonomisch geformte Dampfpistole mit optimalen Wechsel-Aufsätzen.



STEAMY MINI
Dampfstrahler

- » ideal für kleine Labore und Mehrplatzanwendungen
- » schneller Temperatur- und Druckaufbau durch im Tank integrierte Heizung
- » isolierte, ergonomisch geformte Dampfpistole
- » optionale Dampfdüsen und Bürsten erhältlich (s. Seite 22)



SUPERSTEAM
Dampfstrahler

- » Tank mit großer Kapazität
- » Trocken- / Nassdampf- und Ausbrühfunktion
- » Dampfdruck, -menge und -feuchte stufenlos dosierbar
- » Druckluftfunktion
- » Kesseldruckanzeige
- » einfache manuelle Befüllung und Bedienung
- » optionale Dampfdüsen und Bürsten erhältlich (s. Seite 22)



TRONADA
Dampfstrahler

- » kein Auffüllen mehr nötig durch automatische Befüllung
- » besonders praktisch in großen Zahnlaboren
- » Trocken- / Nassdampf- und Ausbrühfunktion
- » Dampfdruck, -menge und -feuchte stufenlos dosierbar
- » Kesseldruckanzeige
- » optionale Dampfdüsen und Bürsten erhältlich (s. Seite 22)



DELIMER COMFORT
Wasserenthärter

- » enthärtet Leitungswasser
- » perfekt als Zubehör für den TRONADA und andere automatisch befüllbare Dampfstrahler
- » kein aufwändiger Patronen-tausch notwendig durch Ionenaustauschprinzip
- » mit optionaler Wasserentnahme für manuell befüllbare Dampfstrahler
- » einmal wöchentlich eine automatische Regeneration

Unsere Dampfstrahler sind auch als Medizinprodukt erhältlich. Sprechen Sie uns gerne an.

TIPP!



Für alle manuell befüllbaren Dampfstrahler empfehlen wir den REITEL-Entkalker. So bleibt Ihr Gerät dauerhaft kalkfrei! (Best.-Nr.: 90410000)

TECHNISCHE DATEN	STEAMY MINI	SUPERSTEAM	TRONADA	DELIMER COMFORT
Netzanschluss	230V/50–60Hz	230V/50–60Hz	230V/50–60Hz	230V/50–60Hz
Wasseranschluss	***	***	max. 4 bar	max. 6 bar
Aufnahmeleistung	1.200 W	2.200 W	3.200 W	90 W
Maße (B x H x T)	33 x 28 x 33 cm	30 x 42 x 35 cm	33 x 42 x 35 cm	32,7 x 30 x 34 cm
Gewicht	8 kg	14 kg	15 kg	11 kg
Temperatur	150 °C	160 °C	160 °C	***
Druck	4,5 bar	6 bar	6 bar	***
Tankinhalt	3,5 l	5 l	5 l	ca. 1,5 l / min
Feuchtigkeit + Menge	fix	stufenlos regelbar	stufenlos regelbar	***
Befüllung	manuell	manuell	automatisch	automatisch
Bestell-Nummer	10904000	14201000	10101000	20205000



BIOSTEAM CENTER
Abdampfcenter

- » entstehende Feuchtigkeit wird direkt abgesaugt
- » freie Sicht beim Abdampfen
- » gesundheitsschonend: Sie atmen keine Aerosole oder Schmutz ein
- » Schmutzpartikel werden in einem speziellen, dreifachen Filtersystem gebunden
- » unabhängig vom Waschbecken aufstellbar



ABDAMPFSCHALE
Abdampfschale

- » ideal für Labore mit geringen Platzverhältnissen
- » saubere Arbeitsumgebung
- » bindet Schmutz und Dampf beim Abdampfen
- » überall im Labor aufstellbar
- » leicht zu reinigen
- » stabile Edelstahlqualität



ENTKALKUNG-FILTERSYSTEM

mit wechselbaren Filterkartuschen

- » Zuverlässige Entkalkung empfohlen für mittleren Kalkgehalt
- » Durchflussmesser zeigt den Wechselzeitpunkt an
- » Einfach zu tauschende Kartuschen (im Wechsel-System)
- » Für TRONADA Dampfstrahler



TIPP! Das REITEL-Spray hilft Ihnen dabei, Ihr Gerät in Sekundenschnelle von Verschmutzungen zu befreien. Dafür einfach vor der ersten Nutzung des Geräts die Edelstahl-Oberfläche mit dem Spray einsprühen. So haben Sie einen Schutzfilm, der vor Staub und Schmutz schützt und jederzeit mit einigen Sprühstößen erneuert werden kann.

(Best.-Nr.: 90405000)

TECHNISCHE DATEN	BIOSTEAM CENTER	ABDAMPFSCHALE
Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz	***
Aufnahmeleistung	200 W	***
Maße (B x H x T)	54 x 60 x 51 cm	ø 32 x H 27 cm
Gewicht	35 kg	2,5 kg
Bestell-Nummer	10106000	10110000

TECHNISCHE DATEN	ENTKALKER PATRONE
Maße (B x H x T)	117/104/419 mm
Gewicht	2,8 kg
Temperatur	4 – 30 °C
Bestell-Nr.	20127000



Best.-Nr.: 20002000
» Luer-Lock Sieb für das Abdampfen von Kleinprothesen und Zahnersatzteilen



» sauber und hygienisch Abdampfen mit dem BIOSTEAM CENTER

REINIGEN IN DER PRAXIS

Für höchste Hygiene und verlässlichen Infektionsschutz im täglichen Praxisbetrieb bietet REITEL spezialisierte Reinigungsgeräte, die höchste Ansprüche erfüllen. Eine makellose Sauberkeit von Instrumenten und Werkstücken ist die essenzielle Basis für sichere Behandlungsabläufe und schützt Patienten sowie das Praxisteam nachhaltig vor Kontaminationen. Das Ultraschallreinigungsgerät SONIRET garantiert dabei eine gründliche und schonende Vorreinigung. Durch kraftvolle Ultraschallwellen werden Schmutzpartikel, Beläge und organische Rückstände selbst an schwer zugänglichen Stellen – wie feinen Rillen, Vertiefungen oder Gelenken – mühelos gelöst. Die effektive Kavitation schont

das Material und sorgt für perfekte Sauberkeit als optimale Vorbereitung für die spätere Sterilisation. Für die professionelle Aufbereitung von herausnehmbarem Zahnersatz, Aufbissschienen und KFO-Apparaturen ist das PROTOFRESH die ideale Ergänzung. Es entfernt hartnäckige Beläge, Zahnstein und Verfärbungen schnell, schonend und gründlich. Dank der kompakten Bauweise und einfachen Handhabung lassen sich Patientenarbeiten direkt in der Praxis hygienisch auffrischen und makellos sauber übergeben. Mit REITEL setzen Sie auf langlebige Edelstahlqualität und höchste Standards im Praxisalltag.



SONIRET SWEEP
Ultraschallgerät

- » effektive Reinigung von Werkzeug und Instrumenten mit der neuen SWEEP-Technologie (pulsierende Intensität)
- » besonders gut geeignet für schwer zugängliche Stellen
- » individuelle Einstellung von Temperatur und Ultraschalldauer
- » umfangreiches Zubehör
- » hygienisch durch Edelstahl-Oberfläche



SONIRET RP COOL I HEAT
Ultraschallgerät

- » effektive Reinigung von Werkzeug und Instrumenten
- » besonders gut geeignet für schwer zugängliche Stellen
- » individuelle Einstellung von Temperatur (HEAT- Variante) und Ultraschalldauer
- » umfangreiches Zubehör
- » hygienisch durch Edelstahloberfläche
- » Zwei Reinigungstanks mit je einem Auslassventil



PROTOFRESH
Prothesenreiniger

- » hohe Reinigungsleistung durch Links- und Rechtsdrehung
- » Zeit individuell einstellbar über digitalen Timer
- » Drehzahl stufenlos regelbar bis zu 3.000 U/min.
- » Lieferung inkl. Becher und 1 L Reinigungsflüssigkeit
- » Nadelreiniger mit 5mm-Nadeln

TECHNISCHE DATEN	SONIRET SWEEP
Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz
Aufnahmeleistung	200 W
Maße (B x H x T)	28 x 21 x 19 cm
Tank-Maße (B x H x T)	24 x 10 x 14 cm
Frequenz	39,5 – 40,5 KHz
Gewicht	4,5 kg
Volumen	3 l
Bestell-Nummer	10200100

TECHNISCHE DATEN	SONIRET RP
Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz
Aufnahmeleistung	400 W
Maße (B x H x T)	58 x 28 x 29,7 cm
Innenmaß-Tanks (B x H x T)	21,5 x 11 x 21,5 cm
Frequenz	40 KHz
Gewicht	14,7 kg
Ohne Heizung (RP COOL)	1020005
Mit Heizung (RP HEAT)	1020006

TECHNISCHE DATEN	PROTOFRESH
Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz
Aufnahmeleistung	150 W
Drehzahl	max. 3.000 U/min.
Maße (B x H x T)	22,5 x 23,5 x 22,5 cm
Becher-Maße (ø x H)	10 x 8 cm
Gewicht	7 kg
Volumen	ca. 0,6 l
Bestell-Nummer	10510000

Das SONIRET SWEEP ist auch als Medizinprodukt erhältlich. Sprechen Sie uns gerne an.

TIPP! Passend für das SONIRET Ultraschall-Reinigungsgerät erhalten Sie verschiedene Einlegekörbe aus Metall oder Kunststoff sowie Becher und Haltesysteme. Umfassende Infos dazu finden Sie auch ab Seite 26.

Einlegekorb, Edelstahl Best.-Nr.: 20400000
 Einlegekorb Kunststoff, Best.-Nr.: 20401000
 Glashalter Edelstahl, Best.-Nr.: 20403000
 Glasbecher, niedrige Form, mit Ausguss und Ring, Best.-Nr.: 20402000
 Einlegekorb, Kunststoff ø = 75 mm Best.-Nr.: 20405000
 Einlegekorb, Edelstahl, ø = 60 mm Best.-Nr.: 20404000



PROTOFRESH Zubehör

REITEL-Clean, 1 Liter,
Best.-Nr.: 90406000

Reinigungsnadeln 5 mm,
Inhalt: 50g, Best.-Nr.: 20500000

Kunststoff-Becher, inkl. Deckel und
Dichtung, Best.-Nr.: 20500055

Haltemagnet,
Best.-Nr.: 2050006



TEMPERIEREN

Mit dem THERMORET lassen sich thermoplastische Materialien erwärmen. Komposite beispielsweise werden fließfähiger und sind einfacher zu verarbeiten. Arbeitsschritte in der Praxis, wie die Erstellung einer Wachsentrisk oder Funktionsabformungen bei Totalprothesen, werden so erheblich vereinfacht. Das spart vor allem Kraft, Zeit und Nerven – bei Ihnen und Ihren Patienten. Denn auch Anästhetika und Instrumente lassen

sich mit dem THERMORET vortemperieren. Das Empfinden des Patienten während einer Zahnbehandlung wird auf diese Weise positiv beeinflusst!

Im Lieferumfang enthalten ist eine Edelstahlbox zum Erwärmen von Wachsplatten. Ein separates Wasserbad ist somit nicht mehr erforderlich. Die Box können Sie einfach entnehmen und thermisch desinfizieren sowie sterilisieren.



THERMORET Heizplattengerät

- » angenehmer Effekt für die Patienten durch vorgewärmte Anästhetika, Bissregistratur, etc.
- » Spiegel beschlagen nicht mehr durch Anwärmen
- » Komposite lassen sich einfacher verarbeiten
- » gradgenaue und stabile Temperatureinstellung
- » Box sterilisierbar über den Thermodesinfektor

TIPP! Wir empfehlen, auf den Boden des Wassertanks ein passend geschnittenes Tray-Papier zu legen. So bleiben Materialien nicht am Boden haften, wenn sie ins Wasser gelegt werden. Auch die Reinigung des Behälters wird dadurch deutlich vereinfacht.



TECHNISCHE DATEN	THERMORET
Netzanschluss	230V/50–60Hz
Aufnahmeleistung	180W
Maße (B x H x T)	22 x 13,5/18 x 23 cm
Gewicht	5,5 kg
Temperatur	max. 70 °C
Volumen	0,8l
Bestell-Nummer	16002000

RÜHREN & RÜTTELN

Rührgeräte sind in ständiger Bewegung. Deshalb bietet sich hier ein widerstandsfähiges Material an: Edelstahl. Gleichzeitig lassen sich die Rührgeräte sehr leicht reinigen und von eventuellen Schmutzresten befreien. Die Kombination aus einfacher Handhabung und intuitiver

Bedienung ermöglicht schnelles Arbeiten und reduziert die Rüstzeiten. Informieren Sie sich auch über das jeweilige Zubehör – z. B. die hochwertigen Rührbecher für die Vakuumrührgeräte, die wir in verschiedenen Größen und mit verschiedenen Rührwerken anbieten.



VACURET EASY
Vakuumrührgerät

- » unkompliziertes Anrühren von Gipsen, Einbettmassen und Alginaten mit nur einem Handgriff
- » kein Druckluftanschluss nötig durch integrierte, wartungsfreie Vakuumpumpe
- » integriertes Doppelfiltersystem
- » Gerät für Wandmontage, inkl. 400 ml-Becher



VACURET CLASSIC
Vakuumrührgerät

- » sekundengenaues Anrühren von Gipsen, Einbettmassen und Alginaten via Zeitschaltuhr
- » stufenlose Drehzahlregelung
- » kein Druckluftanschluss nötig durch integrierte, wartungsfreie Vakuumpumpe
- » integriertes Doppelfiltersystem
- » Gerät für Wandmontage, inkl. 400 ml-Becher



VACURET DIGIT
Vakuumrührgerät

- » für Gipse, Einbettmassen, Alginat, Silikone und Harze
- » Digitales Farbdisplay mit Dreh- und Drück-Bedienung
- » 4 feste Programme, 24 programmierbare Speicherplätze
- » kein Druckluftanschluss nötig durch integrierte, wartungsfreie Vakuumpumpe
- » integriertes Doppelfiltersystem
- » Kohlebürstenfreier Rührmotor für den Dauerbetrieb

TECHNISCHE DATEN	VACURET EASY	VACURET CLASSIC	VACURET DIGIT
Netzanschluss	230V/50–60Hz	230V/50–60Hz	230V/50–60Hz
Aufnahmeleistung	480 W	480 W	600 W
Maße (B x H x T)	15 x 25 x 28 cm	15 x 25 x 28 cm	15 x 25 x 28 cm
Maße inkl. Ständer (B x H x T)	22 x 71 x 36 cm	22 x 71 x 36 cm	22 x 71 x 36 cm
Gewicht	8 kg	8 kg	8 kg
Gewicht inkl. Ständer	15 kg	15 kg	15 kg
Drehzahl	fix 370 U/min.	variabel 150 – 850 U/min.	variabel 200 – 600 U/min.
Vakuum	max. 93 %	max. 93 %	max. 93 %
Bestell-Nummer	10606100	10607100	10608100

» Inhalt gibt den nutzbaren Inhalt an. Tatsächlicher Inhalt ist größer

75 ml Rührbecher
Best.-Nr.: 2130210



150 ml Rührbecher
Best.-Nr.: 21302000
Alginate: 26306000



400 ml Rührbecher
Best.-Nr.: 21303000
Alginate: 26307000



600 ml Rührbecher
Best.-Nr.: 21304000



1.000 ml Rührbecher
Best.-Nr.: 21213000



Die Becher bestehen aus einem langlebigen und hygienischen Metalldeckel. Die Becher sind von innen für eine leichte Reinigung und gegen Trübungen beschichtet.



» blasenfreie und homogene Ergebnisse mit dem VIBROMAT

Um ein perfektes Ergebnis zu erzielen und den Patienten optimal zufrieden zu stellen, darf dieses Gerät während des zahntechnischen Workflows auf keinen Fall fehlen: der VIBROMAT!

Abformmaterialien wie auch Gipse oder Einbettmassen werden durch ihn homogen und blasenfrei. Die vollständige Entkopplung von Basis- und Rüttелеlement führt zu ruhigem Stand auf der Arbeitsfläche und hervorragenden Ergebnissen.



VIBROMAT
Rüttler

- » Intensität des Rüttlers lässt sich individuell einstellen
- » zwei auswählbare Schwingfrequenzen
- » vollständige Entkopplung von Rüttelplatte und Geräteunterseite verhindert die Übertragung der Vibration auf die Arbeitsfläche
- » abnehmbare, waschbare Gummiauflage
- » inkl. Vibrations- / Rüttelblech

TECHNISCHE DATEN	VIBROMAT
Netzanschluss	230V / 50 – 60Hz
Aufnahmeleistung	150 W
Maße (B x H x T)	30 x 12,5 x 17 cm
Gewicht	6 kg
Schwingfrequenz/ min.	3.000 und 6.000
Intensität	stufenlos regelbar
Bestell-Nummer	14002000

TRIMMEN

» ROTOGRIND NT mit großem Fenster zum Trimmen

Den ROTOGRIND-Trimmer erhalten Sie in drei Varianten: Die CLAS-SIC-Version als reiner Nasstrimmer ist perfekt geeignet für kleine Labore. Der größere ROTOGRIND NT mit Scheibenspülung ist als Nass- und Trockentrimmer für alle Eventualitäten bestens gerüstet und außerdem als KFO-Variante erhältlich. Alle Trimmer beinhalten einen laufruhigen, kohlebürstenfreien Motor, der – kombiniert mit

hochwertigen Schleifscheiben – ein optimales Schliffbild gewährleistet. Bei einer Drehzahl von 3.000 U/min sorgt das hochwertige Edelstahl-Gehäuse für die nötige Standfestigkeit. Die Fronten sind mit nur einem Handgriff abnehmbar und lassen sich so hervorragend reinigen. Die Materialoberfläche bietet gleichzeitig eine hygienische Basis.



ROTOGRIND CLASSIC
Nasstrimmer

- » perfekt für Labore mit geringen Platzverhältnissen durch kompakte Abmessungen
- » robustes Edelstahl-Gehäuse für einen vibrationsfreien Lauf
- » verstellbarer Auflagetisch
- » einfach abnehmbare Gerätefront für schnellen Scheibenwechsel und Reinigung
- » durchzugsstarker Motor



ROTOGRIND NT
Nass-/Trockentrimmer

- » Nass- und Trockenfunktion einfach wechselbar per Knopfdruck
- » inkl. automatischer Scheibenspülung und Bremse beim Abschalten des Motors
- » Auflagetisch stufenlos winkelverstellbar
- » schwenk- bzw. abnehmbare Front mit Schnellverschluss für bessere Reinigung und schnellen Scheibenwechsel



ROTOGRIND NT KFO
Nass-/Trockentrimmer mit KFO-Front

- » präzise Winkel an Ober- und Unterkiefermodellen über gelagerten Schieber
- » extragroße Schleifscheibenöffnung
- » leichtgängige Axialverschiebung
- » Rastsystem für übliche Winkel erleichtert die Festeinstellung
- » Winkleinheit für Reinigungszwecke und Nutzung ohne KFO-Tisch wegschwenkbar
- » optionaler Strichlaser



Best.-Nr.: 20308000

STRICHLASER
Zusatzoption für ROTOGRIND NT und ROTOGRIND NT KFO




TIPPI! Für die Reinigung im Innenraum und zum schnellen Wechseln der Schleifscheiben können die Fronten der ROTOGRIND-Trimmer einfach geöffnet werden.

TECHNISCHE DATEN	ROTOGRIND CLASSIC	ROTOGRIND NT	ROTOGRIND NT KFO
Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz	230 V / 50 – 60 Hz	230 V / 50 – 60 Hz
Aufnahmeleistung	1.300 W	1.500 W	1.500 W
Maße (B x H x T)	31 x 31 x 40 cm	35 x 35 x 47 cm	35 x 35 x 47 cm
Gewicht	20 kg	22 kg	22 kg
Drehzahl	3.000 U/min.	3.000 U/min.	3.000 U/min.
Scheibendurchmesser	25 cm	25 cm	28 cm
Bestell-Nummer	13400000	10301000	43305000 (Set)



» seitlicher Schnellverschluss ermöglicht einen einfachen Scheibenwechsel


für ROTOGRIND NT / KFO

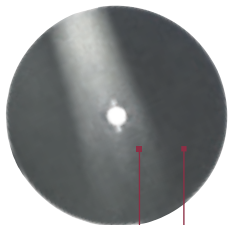

VOLLDIAMANT


mittlere Körnung
Edelstahl-Träger
Durchmesser: 25 cm
Gewicht: 2,15 kg
Best.-Nr.: 20302000

für ROTOGRIND NT und ROTOGRIND CLASSIC

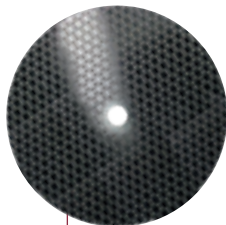


TEILDIAMANT DELTA

Dreiecke
Aluminium-Träger
Durchmesser: 25 cm
Gewicht: 0,75 kg
Best.-Nr.: 23401000

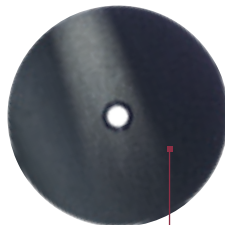


TEILDIAMANT PW

Punkte
Kunststoff-Träger
Durchmesser: 25 cm
Gewicht: 0,5 kg
Best.-Nr.: 23301000

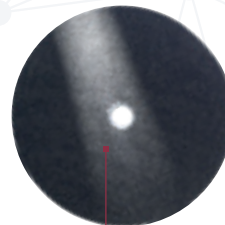

SILICIUMCARBID

mittel
beidseitig verwendbar
Durchmesser: 25 cm
Gewicht: 0,55 kg
Best.-Nr.: 20301000

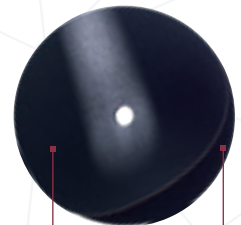

KORUND-TRÄGER

mit Klettschicht
Aluminium-Träger
Durchmesser: 25 cm
Gewicht: 0,65 kg
Best.-Nr.: 22204000

VOLLDIAMANT KFO

mittlere Körnung
Edelstahl-Träger
Durchmesser: 28 cm
Gewicht: 2,65 kg
Best.-Nr.: 20309000

KORUND-SCHEIBE

K80
Klett
Durchmesser: 25 cm
Gewicht: 0,05 kg
Best.-Nr.: 22205000



TIPPI! Für Zahntechniker, die sich auf Kieferorthopädie spezialisiert haben, empfehlen wir den ROTOGRIND NT mit KFO-Front.

Neben der zuverlässigen Nass-/Trocken-Funktion hat diese Variante eine extra große Schleiföffnung. Außerdem können Sie Ihre Modelle ganz einfach mit Hilfe des stabilen – und dennoch flexiblen – Angulations-tisches bearbeiten.

TIPPI! Zum Absaugen von Staub während der optional genutzten Trockenfunktion empfehlen wir Ihnen für den ROTOGRIND NT / KFO den DUSTY COMFORT Nass- und Trockensauger. Mehr Infos zu unseren Absaugungen erhalten Sie auf Seite 20.



ARBEITSPLATZLEUCHTEN



» LED Arbeitsplatzleuchten mit seitlichen, selbsterklärenden Bedienfeldern

Die ARBEITSPLATZLEUCHTEN von REITEL bieten neben dem ansprechenden Design und der extrem leichten Bauweise eine hervorragende Leuchtkraft und somit beste Sicht auf Ihr Arbeitsumfeld. Eine Umleitung der Lichtstrahlen mit mehr als 100.000 Mikrolinsen sorgt für eine homogene Lichtverteilung und reduziert die Schattenbildung und Reflexionen auf Objekten. Durch einen Dimmer kann sowohl die Lichtfarbe (Tageslicht: 6.500 K / warmes Licht: 3.000 K) als auch die Helligkeit individuell eingestellt werden. Einstellungen, die häufig verwendet werden, können auf drei Speicherplätzen gesichert bzw. durch einen einfachen Knopfdruck wieder abgerufen werden.



» Standardklemme im Lieferumfang enthalten zur Befestigung am Tisch



Best.-Nr.: 19101000

Best.-Nr.: 19111000

LED-LEUCHTE TABLE MINI

Arbeitsplatzleuchte zur Tischbefestigung

LED-LEUCHTE TABLE COMFORT

Arbeitsplatzleuchte zur Tischbefestigung



Best.-Nr.: 29172000

AUFSCHRAUBKLEMME

Zusatzoption für LED-Leuchten zur Befestigung auf dem Tisch



Best.-Nr.: 29173000

WANDBEFESTIGUNG

Zusatzoption für LED-Leuchten zur Befestigung an der Wand

- » durch fünf Gelenkpunkte in nahezu jede Richtung und in jedem Winkel verstellbar
- » Stellschraube ermöglicht flexible Montage z.B. an einer Tischplatte und ist mit nur einem Handgriff einfach zu lösen
- » Gelenkarm und Leuchte aus extrem leichtem Aluminium
- » optimal geeignet auch für die Arbeit an einem Prüfplatz
- » originalgetreue Farbwiedergabe (Ra-Wert > 90)
- » stufenlos dimmbar in Helligkeit und Farbtemperatur
- » drei Speicherplätze für bevorzugte Einstellungen

TECHNISCHE DATEN	LED-LEUCHTE TABLE MINI	LED-LEUCHTE TABLE COMFORT
Netzanschluss	48 V / 50 – 60 Hz	48 V / 50 – 60 Hz
Aufnahmeleistung	24 W	48 W
Maße (B x H x T)	30,4 x 3,1 x 19,8 cm	56,4 x 3,1 x 19,8 cm
Gewicht / inkl. Gelenkarm	0,65 kg / 1,45 kg	1,75 kg / 2,55 kg
Lichtfarbe / R _a -Wert	weiß, einstellbar / > 90	weiß, einstellbar / > 90
Abstrahlwinkel	ca. 60°	ca. 60°
Beleuchtungsstärke 0,5 m	2.510 Lux	4.650 Lux
Beleuchtungsstärke 1,0 m	664 Lux	1.322 Lux
Beleuchtungsstärke 1,5 m	320 Lux	617 Lux
Leuchtdauer	> 50.000 h	> 50.000 h
Bestell-Nummer / inkl. Gelenkarm	19101000	19111000



POLYMERISIEREN

Profitieren Sie von zwei Methoden, um Ihre Werkstücke, wie z.B. Schienen, Prothesen oder individuelle Abformlöffel, abschließend zu polymerisieren. Für heiß- oder kalthärtende Produkte empfehlen wir Ihnen den POLYMAT Drucktopf, in dessen Kessel Sie bequem Artikulatoren oder mehrere Küvetten platzieren können. Eine Maximaltemperatur bis zu 120 °C (Standard: 100 °C) und Druck bis zu 6 bar sorgen dabei für die gewünschte Härte und Stabilität Ihres Produkts.

Optional mit einer Temperatur-Erweiterung bis 120 °C bestellbar




POLYMAT

Polymerisationsgerät

- » für Artikulatoren oder mehrere Küvetten im Küvettenspanner
- » schneller Druckaufbau
- » elektronische Temperaturregelung
- » Aufheizprozess auch bei geöffnetem Deckel möglich
- » mehrfache Sicherheits-einrichtungen
- » Heizkörper außerhalb des Edelstahlbehälters

TECHNISCHE DATEN	POLYMAT
Netzanschluss	230V / 50 – 60Hz
Aufnahmeleistung	1.100W
Maße (B x H x T)	33/62 x 33 x 38 cm
Behälter-Innenmaße	ø 22 x H 19 cm
Gewicht	22kg
Temperatur	max. 100 °C / max. 120 °C
Volumen	7 l
Druck	max. 6 bar
Bestell-Nummer 100 °C	18301000
Bestell-Nummer 120 °C	18301000 + 28300000


TIPP! Im Lieferumfang enthalten ist eine stabile Korbkonstruktion, mit deren Hilfe Sie Ihre fertig polymersierten Arbeiten einfach aus dem heißen Wasser entnehmen können.

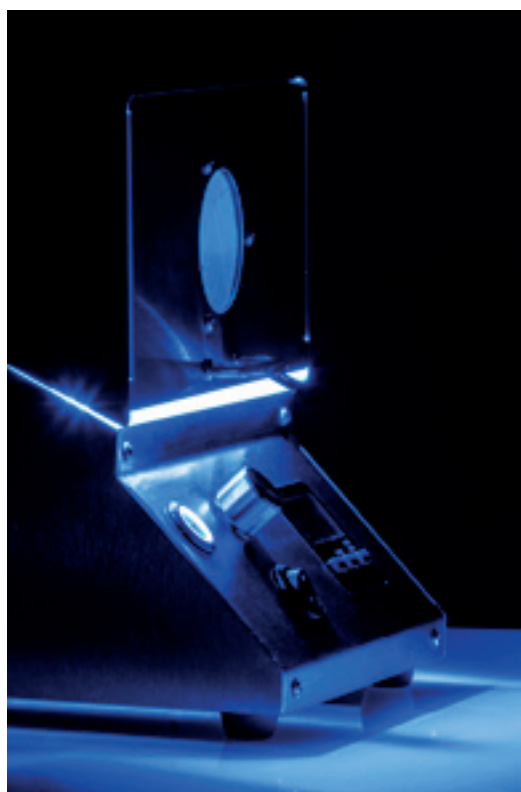

POLYCUR E

Lichthärtegerät

- » drei Lichtfrequenzen für verschiedenste Materialien
- » langlebige Hochleistungs-LED's
- » große Zugriffsfläche und Bewegungsfreiheit über Klappdeckel
- » großzügiger Drehteller
- » Zeit individuell über digitalen Timer einstellbar
- » integrierte Lüftung des Innenraums vermeidet Überhitzung Ihrer Werkstücke

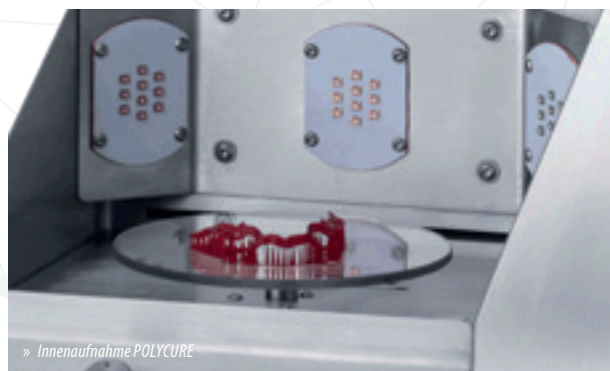

» Innenaufnahme POLYCUR E

Das POLYCUR E Lichthärtegerät ist für Werkstoffe aus dem Bereich der Zahntechnik und des 3D-Drucks konzipiert. Es härtet Kunststoffe innerhalb kurzer Zeit aus.

TECHNISCHE DATEN	POLYCUR E
Netzanschluss	230V / 50 – 60Hz
Aufnahmeleistung	100W
Wellenlänge	385 – 390 / 405 – 410 / 465 – 470 nm
Maße (B x H x T)	21 x 21/44 x 33,5 cm
Drehteller-ø	ø 12,5 cm
Gewicht	5,5 kg
Bestell-Nummer	18310000

VORWÄRMEN & GIEßEN

Zum Ausschmelzen bzw. -brennen von Wachs und Kunststoff haben wir den RETOMAT MINI entwickelt. Die Geräte lassen sich auf bis zu 1.150°C heizen. Damit erreichen Sie für jedes Material die erforderliche Vorwärmtemperatur. Im Zusammenspiel mit einem der REITEL-Gießgeräte erzielen Sie

optimale Güsse – egal ob Edelmetall oder Nicht-Edelmetall. Wählen Sie zwischen induktiver Technik oder der klassischen Variante mit Flamme. Ein äußerst robustes Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl erhalten Sie natürlich in jedem Fall dazu. Gerne stehen wir Ihnen bei Ihrer Entscheidung mit Rat und Tat zur Seite.



RETOMAT MINI
Laborofen



» Optionale Comfortsteuerung

- » speziell für Edelmetall- und Modellgusstechnik
- » Aufheizgeschwindigkeit bis zu 15 °C / min. (max. 900 °C / Std.), Maximaltemperatur: 1.150 °C
- » Vier-Seiten-Heizspiralensystem sorgt für schnelle und gleichmäßige Verteilung sowie für Ausgleich der Temperatur nach Öffnen der Klappe
- » optimale Kammerisolierung verhindert unerwünschtes Entweichen der Hitze
- » EASY-Steuerung für Speed-Einbettmassen

- » optionale **Comfortsteuerung** für individuelle Programmierung von Haltestufen und Zeiten
- » Einlegeplatte aus Keramik und Ventilatoranschluss im Lieferumfang enthalten
- » optional: Katalysator zur Reduzierung von Geruchs- und Rauchbelästigung durch katalytische Nachbehandlung der Ofengase
- » Seitenklappenöffnung

TIPP! Optional erhalten Sie den RETOMAT MINI auch mit Comfort-Steuerung. Darüber können Sie individuell die Temperatur regeln – mit Aufheiz- und Haltestufen, frei wählbaren Programmplätzen, bis zu 30 Rampen, Speed-Programm und Kalender-Funktion.



» praktische Öffnung der Ofentür nach links

TECHNISCHE DATEN	RETOMAT MINI
Netzanschluss	230V / 50 – 60Hz
Aufnahmeleistung	2.500 W
Maße (B x H x T)	39 x 51 x 43 cm
Heizraum-Maße (B x H x T)	16,5 x 11,5 x 15 cm
Volumen	4,6 l
Muffeln (Beispiel)	4 x 3er
Gewicht	32 kg
Bestell-Nummer EASY	17404000
Bestell-Nummer COMFORT	17404001



INDURET MINI

Induktions-Vakuumdruckguss

- » schonendes Aufschmelzen des Metalls durch individuelle Regelung der Generatorleistung
- » schnelles Aufheizen erspart aufwändigen Vorschmelzprozess
- » hoher Druck verdichtet Guss zu lunkerfreiem Gefüge
- » Anschluss an den Wasserkreislauf oder optionale Umlaufkühlung
- » inkl. Temperaturanzeige
- » für EM, NEM in den Muffelgrößen 1, 3, 6, 9 und Metallguss



RETOCAST I

Induktions-Schleuderguss

- » perfekt für Modellguss durch Kombination aus Schleudern und induktivem Aufschmelzen
- » für EM, NEM und Modellguss
- » sicherer und zuverlässiger Gießprozess durch drei Anzugsgeschwindigkeiten
- » inkl. automatischer Absenkung der Induktionsspule für einen schnelleren Gießvorgang
- » einfache Bedienung



RETOCAST T

Flammengusschleuder

- » zuverlässige Technik und einfache Bedienung
- » für EM, NEM und Modellguss
- » auch für gipsgebundene Einbettmassen geeignet
- » wählen Sie aus drei verschiedenen Anzugsgeschwindigkeiten für das optimale Gießergebnis
- » automatische Deckelöffnung
- » individuelles Zubehör für Flammenguss erhältlich

TECHNISCHE DATEN	INDURET MINI	RETOCAST I	RETOCAST T
Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz	230 V / 50 – 60 Hz	230 V / 50 – 60 Hz
Aufnahmeleistung	3.600 W	3.200 W	500 W
Maße (B x H x T)	35 x 39 x 65 / 73 cm	74 x 53 / 93 x 51 cm	71 x 35 / 80 x 55 cm
Gewicht	38 kg	60 kg	44 kg
Luft- / Argondruck	5 – 6 bar	6 bar	***
Wasserdruck	3 – 4 bar (5 l/min.)	3 – 4 bar (5 l/min.)	***
Drehzahl	***	500 U/min.	500 U/min.
Muffelgröße	1 – 9 und Modellguss	1 – 9 und Modellguss	1 – 9 und Modellguss
Gussmenge	EM 110 g / NEM 55 g	EM 110 g / NEM 55 g (min. 15 g)	EM 130 g / NEM 60 g
Temperaturmessung	ab 15 g (i. d. Schmelze)	***	***
Temperatur	max. 1.600 °C	***	***
Bestell-Nummer	13802000	18000000	10502000



» optische Temperaturkontrolle in INDURET und RETOCAST I



UMLAUFKÜHLUNG

für alle Induktionsgießgeräte

- » macht Induktionsgießgeräte autark vom Wasseranschluss und hält Verbrauchskosten gering
- » mit bürstenloser Pumpe für den Dauerbetrieb
- » inkl. Temperaturanzeige und Schmutzfilter


TIPPI! Für jedes unserer Gießgeräte erhalten Sie umfassendes Zubehör – angefangen bei der Umlaufkühlung für die INDURET MINI, über Tiegel für die RETOCAST I, bis hin zum praktischen Gassparapparat für die RETOCAST T.



(Propan) (Erdgas)
Best.-Nr.: 20501000 / 20518000

SCHMELZPAKET

Zusatzoption für RETOCAST T, komplett montiert für EM und NEM

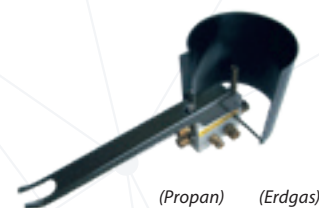

(Propan) (Erdgas)
Best.-Nr.: 20502000 / 20512000

GASSPARAPPARAT

Zusatzoption für RETOCAST T zur Einsparung des Brenngases und Sauerstoff

TECHNISCHE DATEN	UMLAUFKÜHLUNG
Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz
Aufnahmeleistung	150 W
Maße (B x H x T)	45 x 35 x 58 cm
Gewicht	12 kg
Volumen	40 l
max. Pumpenleistung	10 l/min.
Bestell-Nummer	23807000

SANDSTRAHLEN

» Düsen für die SANDURET- und SANDUBLAST-Geräte sind in vier verschiedenen Durchmessern erhältlich.

Bei den Sandstrahlern von REITEL können Sie sich – je nach Nutzungsanforderung – zwischen den verschiedenen Optionen entscheiden: Umlaufstrahler, Mikrofeinstrahler oder eine Kombination aus beidem? Zwei, drei oder vier Strahlmittelbehälter?

Sowohl mit dem SANDURET als auch mit dem SANDUBLAST erhalten Sie ein hochwertiges Gerät aus robustem Edelstahl, mit Handdurchführungen aus Leder und einer hohen Strahlleistung.

Ein optimales Ergebnis der Strahlarbeiten im zahntechnischen Labor ist somit stets gewährleistet.

Arbeiten wie Reinigen, Mattieren oder Glänzen werden durch einen Fußschalter und den eingebauten Schnellstopp vereinfacht. Wasserabscheider und Filter vermeiden unnötigen Wartungsaufwand und halten Ausfallzeiten gering.



SANDURET EASY
Mikrofeinstrahler

- » Geringer Platzbedarf durch optimales Verhältnis von Fläche und Bewegungsfreiheit
- » Hervorragendes Preis- / Leistungsverhältnis für ein hochwertiges Edelstahlgerät
- » Fußschalter reagiert auf leichten Druck und ermöglicht Arbeiten im Sitzen
- » Strahlkammern per Stecksystem nachrüstbar bzw. aus- und einzubauen



SANDURET 2
Mikrofeinstrahler

- » wählen Sie zwischen zwei, drei oder vier Strahlmittelbehältern für verschiedene Körnungen
- » sparsame & wartungsfreier Schnellstopp-Funktion
- » beheizte Behälter verhindern ein Verstopfen der Düsen und sorgen für gleichmäßigen Materialfluss
- » Bewegungsfreiheit durch ultra-flexible Schläuche
- » inklusive Fußschalter
- » praktische Behälterwahl über einen Drehschalter innerhalb der Strahlkammer
- » schnell nachfüllbar durch Schnellentlüftung



SANDURET 3
Mikrofeinstrahler

- » integrierte LED-Innebeleuchtung und hautsympathische Echtleder-Eingriffe sorgen für angenehmes Arbeiten
- » inklusive Ausblasdüse zur Reinigung der Objekte mittels Luftdruck
- » der obere Absauganschluss und eine Schutzfolie gewährleisten beste Sicht und Scheibenschutz
- » reduzierte Wartung oder Ausfallzeiten durch Wasserabscheider und Filter
- » optional mit Schublade zur einfachen Entsorgung des Strahlguts



SANDURET 4
Mikrofeinstrahler

Abbildung:
Sonderbau mit Schublade

Abbildung:
Sonderbau mit Schublade

TECHNISCHE DATEN	SANDURET EASY	SANDURET 2	SANDURET 3	SANDURET 4
Netzanschluss	230V/50–60Hz	230V/50–60Hz	230V/50–60Hz	230V/50–60Hz
Aufnahmeleistung	10 W	100 W	120 W	140 W
Maße (B x H x T)	45 x 40 x 35 cm	48 x 32/48 x 44 cm	48 x 32/48 x 44 cm	48 x 32/48 x 44 cm
Gewicht	11 kg	17 kg	18 kg	19 kg
Luftverbrauch	ca. 80l/min.	ca. 80l/min.	ca. 80l/min.	ca. 80l/min.
Druck Behälter	0,5–6 bar	0,5–6 bar	0,5–6 bar	0,5–6 bar
Druck Umlaufstrahler	***	***	***	***
Düsen	1,2 + 1,5 mm	1,2 + 1,5 mm	0,8 + 1,2 + 1,5 mm	0,8 + 1,2 + 1,5 + 1,5 mm
Körnung	25–110 µm	25–250 µm	25–250 µm	25–250 µm
Bestell-Nummer	14700000	14601000	14600000	14603000



» Innenaufnahme eines Sandblast 3



SANDUBLAST

Umlaufstrahler

- » Bedienung per Fußtaster
- » viel Bewegungsfreiheit durch großzügige Strahlkammer
- » langlebige Strahldüse lässt sich stufenlos ausrichten
- » Sicherheitsglasscheibe mit Schutzfolie
- » integrierte LED-Innebeleuchtung und hautsympathische Echtleder-Eingriffe



SANDUBLAST 2

Umlauf- und Mikrofeinstrahler

- » wartungsfreier Schnell-Stopp
- » beheizte Behälter verhindern ein Verstopfen der Düsen und sorgen für gleichmäßigen Materialfluss
- » Bewegungsfreiheit durch ultra-flexible Schläuche
- » Bedienung per Fußtaster
- » praktische Behälterwahl über einen Drehschalter innerhalb der Strahlkammer



SANDUBLAST 3

Umlauf- und Mikrofeinstrahler

- » spart Platz und Zeit im Labor durch Kombination von Umlauf- und Mikrofeinstrahler
- » hohe Strahlleistung
- » erhältlich mit zwei oder drei Strahlmittelkammern
- » Umlaufstrahlgut wird mehrfach wiederverwendet
- » Umlaufstrahldüse in der Neigung stufenlos verstellbar

TECHNISCHE DATEN	SANDUBLAST	SANDUBLAST 2	SANDUBLAST 3
Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz	230 V / 50 – 60 Hz	230 V / 50 – 60 Hz
Aufnahmeleistung	100 W	100 W	120 W
Maße (B x H x T)	48 x 36 / 55 x 44 cm	48 x 36 / 55 x 44 cm	48 x 36 / 55 x 44 cm
Gewicht	13 kg	17 kg	18 kg
Luftverbrauch	ca. 80 l / min.	ca. 80 l / min.	ca. 80 l / min.
Druck Behälter	***	0,5 – 6 bar	0,5 – 6 bar
Druck Umlaufstrahler	max. 6 bar	max. 6 bar	max. 6 bar
Düsen	***	1,2 + 1,5 mm	0,8 + 1,2 + 1,5 mm
Körnung	50 – 250 µm	25 – 250 µm	25 – 250 µm
Bestell-Nummer	14604000	14605000	14606000



REITEL KORUND,
Edelkorund, 50 µm, Inhalt 10 kg,
Best.-Nr.: 90442000

REITEL KORUND,
Edelkorund, 50 µm, Inhalt 25 kg,
Best.-Nr.: 90442001

REITEL KORUND,
Edelkorund, 110 µm, Inhalt 10 kg,
Best.-Nr.: 90442010

REITEL KORUND,
Edelkorund, 110 µm, Inhalt 25 kg,
Best.-Nr.: 90442011

REITEL KORUND,
Edelkorund, 250 µm, Inhalt 10 kg,
Best.-Nr.: 90442020

REITEL KORUND,
Edelkorund, 250 µm, Inhalt 25 kg,
Best.-Nr.: 90442021

TIPPI! Optimal abgestimmte Strahlmittel für unsere Sandstrahlgeräte in 2 Gebindegrößen.

REITEL GLANZ,
Glanzstrahlperlen, 50 µm, Inhalt 10 kg,
Best.-Nr.: 90441000

REITEL GLANZ,
Glanzstrahlperlen, 50 µm, Inhalt 25 kg,
Best.-Nr.: 90441001

REITEL GLANZ,
Glanzstrahlperlen, 125 µm, Inhalt 10 kg,
Best.-Nr.: 90441010

REITEL GLANZ,
Glanzstrahlperlen, 125 µm, Inhalt 25 kg,
Best.-Nr.: 90441011



ARBEITSPLÄTZE

» komfortables und gesundheitsschonendes Arbeiten
in den ERGORET-Systemarbeitsplätzen

Die ERGORET-Arbeitsplätze von REITEL wurden speziell entwickelt, um die Arbeit im Labor zu vereinfachen und gleichzeitig die Gesundheit zu schonen. Namensgebend ist die ergonomische Form. Alle Geräte haben dabei einen Mehrfachnutzen und verfügen über nahezu alles, was bei der zahntechnischen, zahnmedizinischen oder kieferorthopädischen Arbeit in Reichweite sein muss. Der ERGORET CCKFO z.B. hat einen Aktivkohlefilter, eine integrierte Lupe, Schubladen, eine Gummiunterlage und einen Auffangbehälter.

Wie alle unsere Geräte werden auch die Arbeitsplätze in akurater Handarbeit gefertigt – von der Holzplatte bis hin zur Schutzhaube aus Sicherheitsglas. In Kombination mit einzelnen Details aus robustem Edelstahl investieren Sie mit einem REITEL ERGORET in einen wertvollen und dauerhaften Helfer im Labor oder für Prüfanwendungen.

Optional erhältlich ist der Vario-Hubtisch, mit dem sich die Arbeitshöhe zum Stehen oder Sitzen um bis zu 300 mm variieren lässt.




ERGORET CLASSIC
Arbeitsplatz

- » wasserdichter, ergonomischer Arbeitsplatz für gesundheitschonendes Arbeiten
- » besonders geeignet für Zirkonnachbearbeitung
- » große, kratzunempfindliche Glassichtscheibe
- » inkl. heller LED-Beleuchtung und Anschlussstutzen für Wasserablauf bzw. Absaugung



ERGORET EASY
Arbeitsplatz mit Absaugung

- » Arbeitet komplett autark ohne externe Absaug-Anlage
- » Großer Glasdeckel und wassergeschützte LED-Beleuchtung
- » Großzügige Durchführungen für ermüdungsfreies Arbeiten
- » Optionaler HEPA-Hochleistungsfilter für maximale Luftreinheit

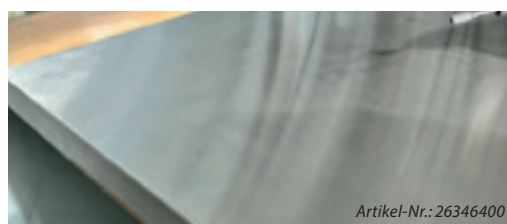


Artikel-Nr.: 26346400

ARBEITSUNTERLAGE
aus Edelstahl, 50 x 40 cm (B x L)

TECHNISCHE DATEN	ERGORET CLASSIC	ERGORET EASY
Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz	230 V / 50 – 60 Hz
Aufnahmeleistung	26 W	25 W
Maße (B x H x T)	46 x 26 / 50 x 43 cm	34 x 27 x 30 cm
Gewicht	8 kg	8 kg
Bestell-Nummer	16901001	16701000

TIPP! Das ERGORET CLASSIC und EASY bieten durch seine große Scheibe optimale Sicht auf Ihre Arbeit. Einen noch besseren Blick bekommen Sie mit der Saugnapf-Lupe.
Bestell-Nummer: 20280000

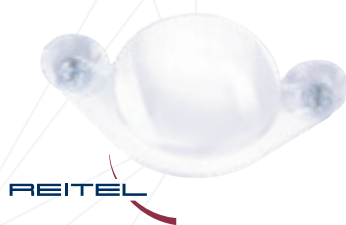



» Jeder unserer Arbeitsplätze wird
in sorgfältiger Handarbeit gefertigt.



ERGORET COMFORT

Arbeitsplatz

- » gesundheitsschonendes Arbeiten auf geringer Fläche dank Sicherheits-Schutzhaube aus Glas
- » Staub und Gase werden direkt abgesaugt
- » Universalanschluss für verschiedene Systeme vorne oder hinten anschließbar
- » inkl. heller LED-Beleuchtung
- » optionale Lupe erhältlich



ERGORET CC

Systemarbeitsplatz


- » vollwertiger Arbeitsplatz für ermüdungsfreies Arbeiten im Labor mit vielen praktischen Funktionen
- » integrierte Absaugung saugt ermüdungsfreies Arbeiten im Labor mit vielen praktischen Funktionen
- » integrierte Absaugung saugt Stäube, Gase und Dämpfe direkt über einen Filter ab
- » zusätzlicher Anschluss für externe Absaugung
- » auch als Prüfplatz einsetzbar
- » optional mit Vario-Hubtisch



ERGORET CC KFO

Systemarbeitsplatz

- » ideales System für kieferorthopädische Arbeiten in KFO-Praxen und Dentallaboren
- » Schmutz, Staub und Methylmethacrylatdämpfe werden großflächig über einen integrierten Aktivkohle-Filter abgesaugt
- » zusätzlicher Anschluss für externe Absaugung
- » auch als Prüfplatz einsetzbar
- » optional mit Vario-Hubtisch

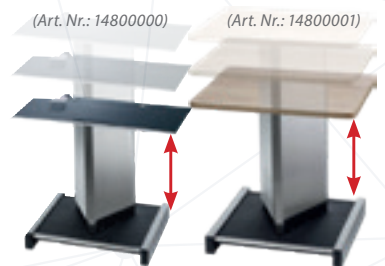

VARIO-HUBTISCHE

Höhenverstellbare Gerätetische

- » ergonomisch gestalteter Hubtisch für langfristiges und ermüdungsfreies Arbeiten
- » nutzbar als Sitz- oder Steharbeitsplatz
- » optional zu ergänzen mit vier Fußrollen für beliebiges Verschieben auf Anfrage
- » für Arbeitstische ERGORET CC, 580 mm bis 880 mm, Höhenverstellung, Art. Nr.: 1480000
- » für sonstige Geräte, mit handgearbeiteter Buchenplatte, 675 mm bis 975 mm, Best.-Nr.: 14800001



TECHNISCHE DATEN	ERGORET COMFORT	ERGORET CC	ERGORET CC KFO
Netzanschluss	230V/50–60Hz	230V/50–60Hz	230V/50–60Hz
Aufnahmeleistung	18 W	120 W	120 W
Maße (B x H x T)	49 x 30 x 40 cm	91 x 67 x 86 cm	91 x 67 x 86 cm
Gewicht	14 kg	60 kg	60 kg
Lupe	4 Dioptrien, optional	4 Dioptrien	4 Dioptrien
Druckluft	***	max. 8 bar	***
Absaugfilter	in Absaugung	Staubfilter	Aktivkohle
Bestell-Nummer	16801001	14803000 (weiß)	14805000 (weiß)

ABSAUGUNGEN

Innerhalb unserer DUSTY-Serie finden Sie für Ihr Labor die passende Absaugung. Egal, ob kleines Praxislabor oder CAD/CAM-spezialisiertes Zahnlabor – den entstehenden Schmutz entsorgen Sie mit unseren Absaugungen auf sichere Art und Weise. Denn die Geräte saugen bis zu 99,95 % der entstehenden Stäube aus Ihrer Umgebung ab.

Die Absaugungen verfügen außerdem über einen Adapter, mit dem Sie den Schlauch an jedes andere Gerät anschließen können. Wir empfehlen die DUSTY-Serie als passendes Zubehör für unsere Sandstrahler oder Arbeitsplätze.

TIPP!



Die DUSTY-Absaugungen sind durch ihren individuellen Anschluss-Adapter für jedes REITEL-Gerät geeignet, das eine Absaugung benötigt – z.B. das SANDURET.



DUSTY MINI HEPA

Trockensauger

- » staubfreie Schmutzentsorgung beim Trimmen oder Strahlen
- » extrem leise bei enormer Saugleistung (49-54 dB(A))
- » perfekt für kleine Labore durch geringe Abmessungen
- » Saugschlauch für jedes Gerät mittels Anschlussadapter
- » 60l/s Luftfördermenge
- » 5-lagige, verschleißbare H13 Vliesfiltertüte
- » HEPA Ausgangsfilter und HEPA Filterbeutel



DUSTY COMFORT

Nass-/Trockensauger

- » hervorragend geeignet zum Absaugen mittlerer Staubkörnungen, z. B. Gipsstäube
- » äußerst effizient durch besonders großes Behältervolumen
- » mit integrierter Steckdose und Einschaltautomatik
- » Saugschlauch für jedes Gerät mittels Anschlussadapter
- » zusätzlicher Schutz durch optionale HEPA-Filterkassette



DUSTY ZIRKON

Feinstaubsauger

- » ideal zum Absaugen von Zirkondioxidstaub (CAD/CAM) und anderen Feinstäuben
- » extrem geringe Geräuschentwicklung
- » absolut flexibel im Anschluss externer Geräte durch speziellen Adapter
- » automatisch zuschaltbare Gerätesteckdose
- » inkl. Filterreinigungsfunktion

TECHNISCHE DATEN	DUSTY MINI HEPA	DUSTY COMFORT	DUSTY ZIRKON
Netzanschluss	230 V/50–60 Hz	230 V/50–60 Hz	230 V/50–60 Hz
Aufnahmeleistung	700 W	1.300 W	1.200 W
Steckdose	USB Steckdose	max. 1.500 W (auto)	2.400 W
Maße (B x H x T)	38 x 28 x 43 cm	36 x 59 x 40 cm	39 x 61 x 57 cm
Gewicht	5 kg	7 kg	16 kg
Filterklasse	Klasse M	95 % (Klasse M)	99,95 % (Klasse H)
Saugleistung	2300 l/min	4200 l/min	4500 l/min
Arbeitsgeräusche	49–54 dB(A)	70 dB(A)	60 dB(A)
Behältervolumen	13 l	30 l	42 l
Bestell-Nummer	12910000	17902000	14500000



Filterbeutel DUSTY MINI HEPA,
Best.-Nr.: 22905100

Filterbeutel DUSTY COMFORT,
Best.-Nr.: 27905000



Filterbeutel DUSTY ZIRKON,
Best.-Nr.: 27806000



POLIEREN

Mit den verschiedenen Poliereinheiten von REITEL schleifen, polieren, säubern und bürsten Sie mühelos Metall-, Kunststoff- und Keramikteile.

Alle POLIRET-Geräte sind für Bimsstein geeignet und verfügen über herausnehmbare Ablageschalen, integrierte LED-Beleuchtung, Schutzscheiben und noch viele weitere Vorteile, die es ermöglichen, den Arbeitsablauf schnell und effektiv zu gestalten. Die kleine POLIRET MINI mit einer Polierspindel eignet sich besonders bei geringen Platzverhältnissen, steht „den Großen“ aber in nichts nach. Für die gesamte Serie – egal, ob mit

ein oder zwei Spindeln – gibt es optional einen Vario-Hubtisch, mit dem sich die Arbeitshöhe individuell einstellen und der Rücken schonen lässt.

TIPPI! Für die perfekt polierte Oberfläche eignet sich das Bimssteinpulver REITEL STONE ideal für Poliereinheiten im Dentallabor.

Best.-Nr.: 90449000



Bohrfutteraufnahme für POLIRET, Best.-Nr.: 22603000

REITEL STONE, Bimssteinpulver, Inhalt 12 kg, Best.-Nr.: 90449000

Filterbeutel für POLIRET / - COMFORT / - TWIN/-, Best.-Nr.: 22702000

Filterbeutel für POLIRET CLASSIC, Best.-Nr.: 22702200

Filterbeutel für POLIRET MINI, Best.-Nr.: 22702100



POLIRET MINI

Poliereinheit

- » besonders geeignet für Labore mit geringen Platzverhältnissen
- » Drehzahl stufenlos regelbar bis zu 4.500 U/min.
- » integrierte Absaugung, die die Luft nach oben hin ableitet
- » waschbare, leicht wechselbare Vliesfilter (Klasse M)
- » inkl. heller LED-Beleuchtung
- » Ablageschale entnehmbar



POLIRET CLASSIC

Poliereinheit

- » Basis-Modell mit zweistufiger Drehzahlregelung
- » integrierte Absaugung je Seite individuell einstellbar
- » bei 40°C waschbare, leicht wechselbare Vliesfilter (Klasse M)
- » herausnehmbare und leicht zu reinigende Polierschalen
- » inkl. heller LED-Arbeitsfeld-Beleuchtung
- » Sicht- und Spritzschutzscheiben optional auch mit Glasscheiben (Best.-Nr.: 22701000)



POLIRET COMFORT

Poliereinheit

- » flexible Poliereinheit – sehr gut geeignet für große Zahnlabore
- » integrierte, extrem leistungsstarke, Absaugung – individuell je Seite einstellbar
- » Abluft wird nach oben geleitet
- » Drehzahl stufenlos regelbar bis zu 4.500 U/min.
- » großzügige Ablageflächen für Schwabbeln etc.
- » inkl. heller LED-Beleuchtung



POLIRET TWIN

Poliereinheit

- » schwenkbare Sicht- / Spritzschutzscheiben
 - » bei 40°C waschbare, leicht wechselbare Vliesfilter (Klasse M)
 - » herausnehmbare und leicht zu reinigende Poliertröge
 - » optional mit Drehzahlanzeige
- POLIRET TWIN:**
- » ein Motor je Seite – Geschwindigkeiten können unabhängig voneinander gesteuert werden

TECHNISCHE DATEN	POLIRET MINI	POLIRET CLASSIC	POLIRET COMFORT	POLIRET TWIN
Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz	230 V / 50 – 60 Hz	230 V / 50 – 60 Hz	230 V / 50 – 60 Hz
Motorleistung	600 W	400 W	550 W	2x 370 W
Absaugleistung	115 W	190 W	400 W	400 W
Maße (B x H x T)	53 x 43 x 40 cm	70 x 49 x 55 cm	70 x 49 x 55 cm	70 x 49 x 55 cm
Gewicht	24 kg	60 kg	60 kg	60 kg
Drehzahl	1.000 – 4.500 U/min.	1.500 / 3.000 U/min. (fix)	270 – 4.500 U/min.	2x 270 – 4.500 U/min.
Absaugvolumen	500 m³/h	600 m³/h	800 m³/h	800 m³/h
Bestell-Nummer	11100000	11111000	10328000	12703000


» Varianten mit Drehzahlanzeige auf Anfrage

TIPPI!

Arbeiten im Sitzen oder im Stehen dank dem Vario-Hubtisch für alle Poliereinheiten von REITEL.

Best.-Nr.: 14800001

Rollen für Hubtisch
Best.-Nr.: 24802000

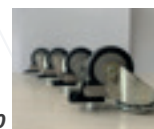



REITEL Feinwerktechnik GmbH

Senfdamm 20 · 49152 Bad Essen · Deutschland

Telefon: +49 (0) 54 72 / 94 32-0 · Telefax: +49 (0) 54 72 / 94 32-40

Internet: www.reitel.com · E-Mail: info@reitел.com

