

Trimmen



» ROTOGRIND NT mit großem Fenster zum Trimmen

Den ROTOGRIND-Trimmer erhalten Sie in drei Varianten: Die MINI-Version als reiner Nasstrimmer ist perfekt geeignet für kleine Labore. Der größere ROTOGRIND NT mit Scheibenspülung ist als Nass- und Trockentrimmer für alle Eventualitäten bestens gerüstet und außerdem als KFO-Variante erhältlich. Alle Trimmer beinhalten einen laufruhigen, kohlebürstenfreien Motor, der – kombiniert

mit hochwertigen Schleifscheiben – ein optimales Schliffbild gewährleistet. Bei einer Drehzahl von 3.000 U/min sorgt das hochwertige Edelstahl-Gehäuse für die nötige Standfestigkeit. Die Fronten sind mit nur einem Handgriff abnehmbar und lassen sich so hervorragend reinigen. Die Materialoberfläche bietet gleichzeitig eine hygienische Basis.



ROTOGRIND MINI
Nasstrimmer

- » perfekt für Labore mit geringen Platzverhältnissen durch kompakte Abmessungen
- » robustes Edelstahl-Gehäuse für einen vibrationsfreien Lauf
- » verstellbarer Auflagetisch
- » einfach abnehmbare Gerätefront für schnellen Scheibenwechsel und Reinigung
- » kohlebürstenfreier und durchzugsstarker Motor



ROTOGRIND NT
Nass-/Trockentrimmer

- » Nass- und Trockenfunktion einfach wechselbar per Knopfdruck
- » inkl. automatischer Scheibenspülung und Bremse beim Abschalten des Motors
- » Auflagetisch stufenlos winkelverstellbar
- » schwenk- bzw. abnehmbare Front mit Schnellverschluss für bessere Reinigung und schnellen Scheibenwechsel



ROTOGRIND NT KFO
Nass-/Trockentrimmer mit KFO-Front

- » präzise Winkel an Ober- und Unterkiefermodellen über gelagerten Schieber
- » extragroße Schleifscheibenöffnung
- » leichtgängige Axialverschiebung
- » Rastsystem für übliche Winkel erleichtert die Festeinstellung
- » Winkeleinheit für Reinigungszwecke und Nutzung ohne KFO-Tisch wegschwenkbar
- » optionaler Strichlaser



TIPP! Für die Reinigung im Innenraum und zum schnellen Wechseln der Schleifscheiben können die Fronten der ROTOGRIND-Trimmer einfach abgenommen werden.







TECHNISCHE DATEN	ROTOGRIND MINI	ROTOGRIND NT	ROTOGRIND NT KFO
Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz	230 V / 50 – 60 Hz	230 V / 50 – 60 Hz
Aufnahmeleistung	1.300 W	1.500 W	1.500 W
Maße (B x H x T)	31 x 31 x 40 cm	35 x 35 x 47 cm	35 x 35 x 47 cm
Gewicht	20 kg	22 kg	22 kg
Drehzahl	3.000 U/min.	3.000 U/min.	3.000 U/min.
Scheibendurchmesser	25 cm	25 cm	28 cm
Bestell-Nummer	13400000	10301000	43305000 (Set)



» seitlicher Schnellverschluss ermöglicht einen einfachen Scheibenwechsel

für ROTOGRIND NT / KFO

für ROTOGRIND NT und ROTOGRIND MINI

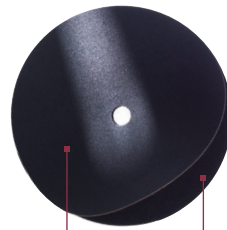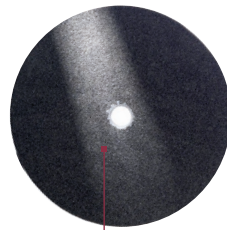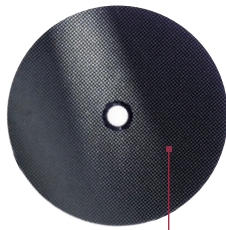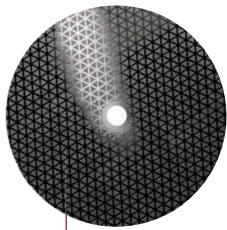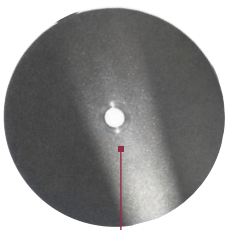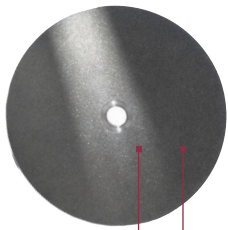

VOLLDIAMANT
mittlere Körnung
Edelstahl-Träger
Durchmesser: 25 cm
Gewicht: 2,15 kg
Best.-Nr.: 20302000

VOLLDIAMANT
grobe Körnung
Edelstahl-Träger
Durchmesser: 25 cm
Gewicht: 2,25 kg
Best.-Nr.: 20303000

TEILDIAMANT PW
Punkte
Kunststoff-Träger
Durchmesser: 25 cm
Gewicht: 0,5 kg
Best.-Nr.: 23301000

KORUND-SCHEIBE
K80
Klett
Durchmesser: 25 cm
Gewicht: 0,05 kg
Best.-Nr.: 22205000

VOLLDIAMANT KFO
mittlere Körnung
Edelstahl-Träger
Durchmesser: 28 cm
Gewicht: 2,65 kg
Best.-Nr.: 20309000

TEILDIAMANT DELTA
Dreiecke
Aluminium-Träger
Durchmesser: 25 cm
Gewicht: 0,75 kg
Best.-Nr.: 23401000

SILICIUMCARBID
mittel
beidseitig verwendbar
Durchmesser: 25 cm
Gewicht: 0,55 kg
Best.-Nr.: 20301000

KORUND-TRÄGER
mit Klettschicht
Aluminium-Träger
Durchmesser: 25 cm
Gewicht: 0,65 kg
Best.-Nr.: 22204000



TIPP! Für Zahntechniker, die sich auf Kieferorthopädie spezialisiert haben, empfehlen wir den ROTOGRIND NT mit KFO-Front.

Neben der zuverlässigen Nass-/Trocken-Funktion hat diese Variante eine extra große Schleiföffnung. Außerdem können Sie Ihre Modelle ganz einfach mit Hilfe des stabilen – und dennoch flexiblen – Angulations-tisches bearbeiten.

TIPP! Zum Absaugen von Staub während der optional genutzten Trockenfunktion empfehlen wir Ihnen für den ROTOGRIND NT / KFO den DUSTY COMFORT Nass- und Trockensauger. Mehr Infos zu unseren Absaugungen erhalten Sie auf Seite 20.

