


# ■ MATÉRIEL

pour la pratique quotidienne en cabinet dentaire

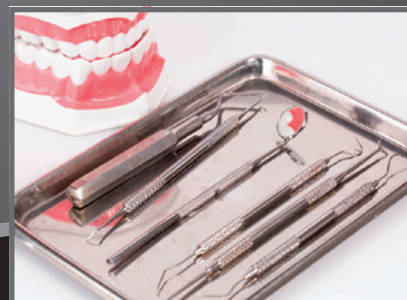

## ■ Nettoyage

## ■ Mise en température

### ROTOCLEAN EASY

Appareil de nettoyage avec brosses

Référence: 10300



- pré-nettoyage des instruments dentaires et chirurgicaux
- aucun contact direct avec des parties contaminées
- deux brosses rotatives dans un bain désinfectant suppriment efficacement les traces de sang et autres résidus tenaces
- les brosses sont stérilisables 50 fois
- le vitre de protection offre une projection fiable contre les projections
- installation directement dans l'évier si désiré

### SONIRET

Bac à ultrasons

Référence: 10200



- nettoyage en profondeur et sans efforts les instruments et objets
- dissoudre efficacement les plus petites particules de saleté, même dans les endroits difficiles d'accès, tels que les orifices
- rotation rapide de l'instrumentation
- le liquide de nettoyage est soumis aux vibrations à haute fréquence
- chauffage intégré
- programmation de la durée et de la température du cycle
- procédure de désinfection à temps réduit
- température de chauffe de 20 à 80 °C
- réglage minuterie 1 – 99 minutes

### THERMORET

Réchauffeur

Référence: 16002



- conditionnement des carpules d'anesthésique, solution d'hypochlorite et plaques de cire
- rend les composites plus fluides
- boîte en inox pour le préchauffage des plaques de cire
- affichage simple et intuitif

## Données techniques

Alimentation	230 V / 50 – 60 Hz
Puissance	30 W
Hauteur	160 mm
	ouvert: 350 mm
Largeur	350 mm
Profondeur	270 mm
	ouvert: 170 mm
Poids	6 kg
Capacité	2,7 l
Boîtier	inox

Alimentation	230 V / 50 – 60 Hz
Puissance	200 W
Capacité	max. 3 l
<b>Dimensions de l'appareil</b>	
Hauteur	210 mm
Largeur	280 mm
Profondeur	190 mm
<b>Dimensions de la cuve</b>	
Hauteur	100 mm
Largeur	240 mm
Profondeur	140 mm
Poids	4,5 kg
Fréquences	40 kHz
Boîtier	inox

Alimentation	230 V / 50 – 60 Hz
Puissance	180 W
Hauteur	135 mm
	avec boîte: 180 mm
Largeur	220 mm
Profondeur	230 mm
Poids	5,5 kg
Température	max. 70 °C
Capacité	env. 0,8 l
Boîtier	inox

## Recommandation

### ROTOCLEAN EASY

Set de brosses nettoyantes .....	20300
Brosses dures .....	20299
Brosse nettoyante en face .....	20295

### SONIRET

Panier, inox .....	20400
Panier, plastique .....	20401
Support bol, inox .....	20403
Bol .....	20402
Panier, plastique .....	20405
Panier, inox .....	20404

### NOTRE RECOMMANDATION PERSONNELLE

REITEL Spray d'entretien pour inox, 250 ml (Ingrédients: Huiles végétales, Huile de parafine, Inhibiteurs) .....	90405
--	-------